



Aditamentos Protésicos

Prótesis provisional
Coronas cementadas o atornilladas
Puentes cementados o atornillados
Full arch fijo/removable




Aditamentos Protésicos

Para cumplir los objetivos funcionales y
estéticos:



La selección de los pilares pasó de ser
una simple conexión entre pilar e implante a
ser una determinante fundamental en el
resultado final.

Aditamentos Protésicos

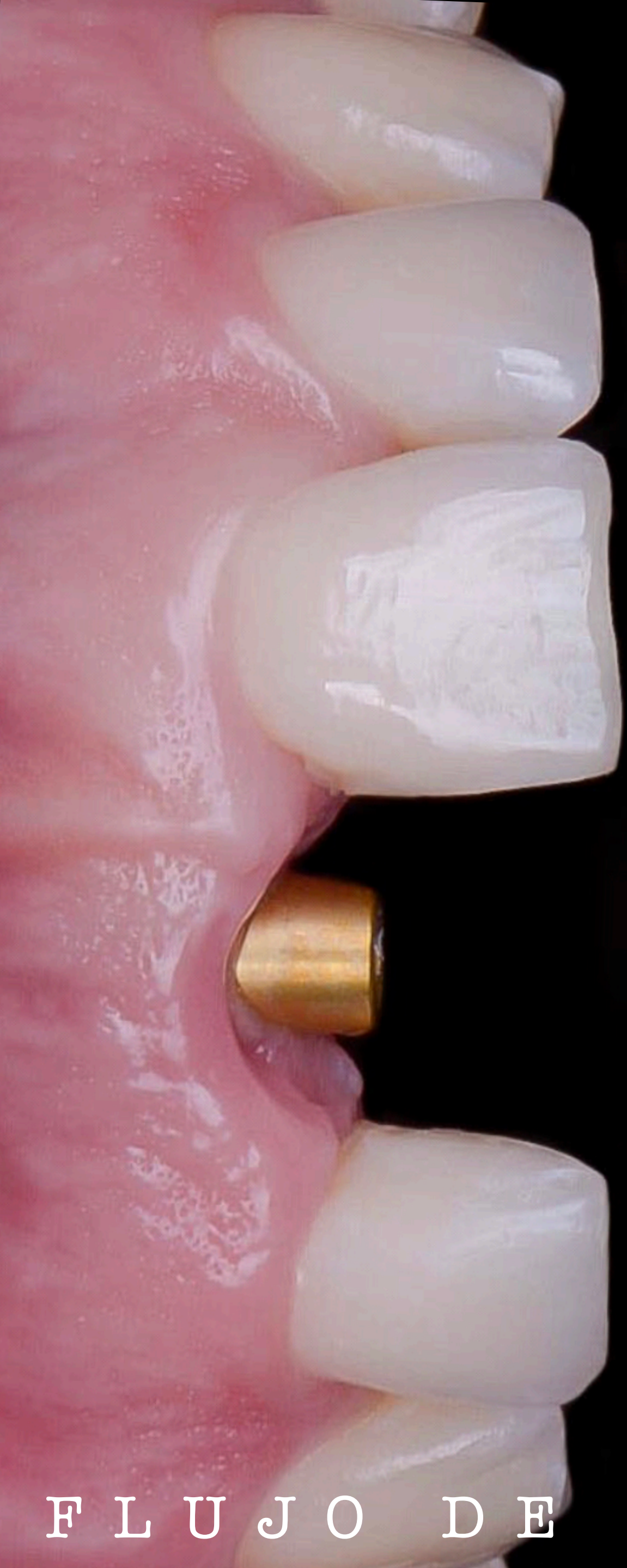


Para cumplir los objetivos funcionales y
estéticos:

Biotipo gingival y
altura gingival


Espacio
mesio-distal

Espacio
Interoclusal

Aditamentos Protésicos

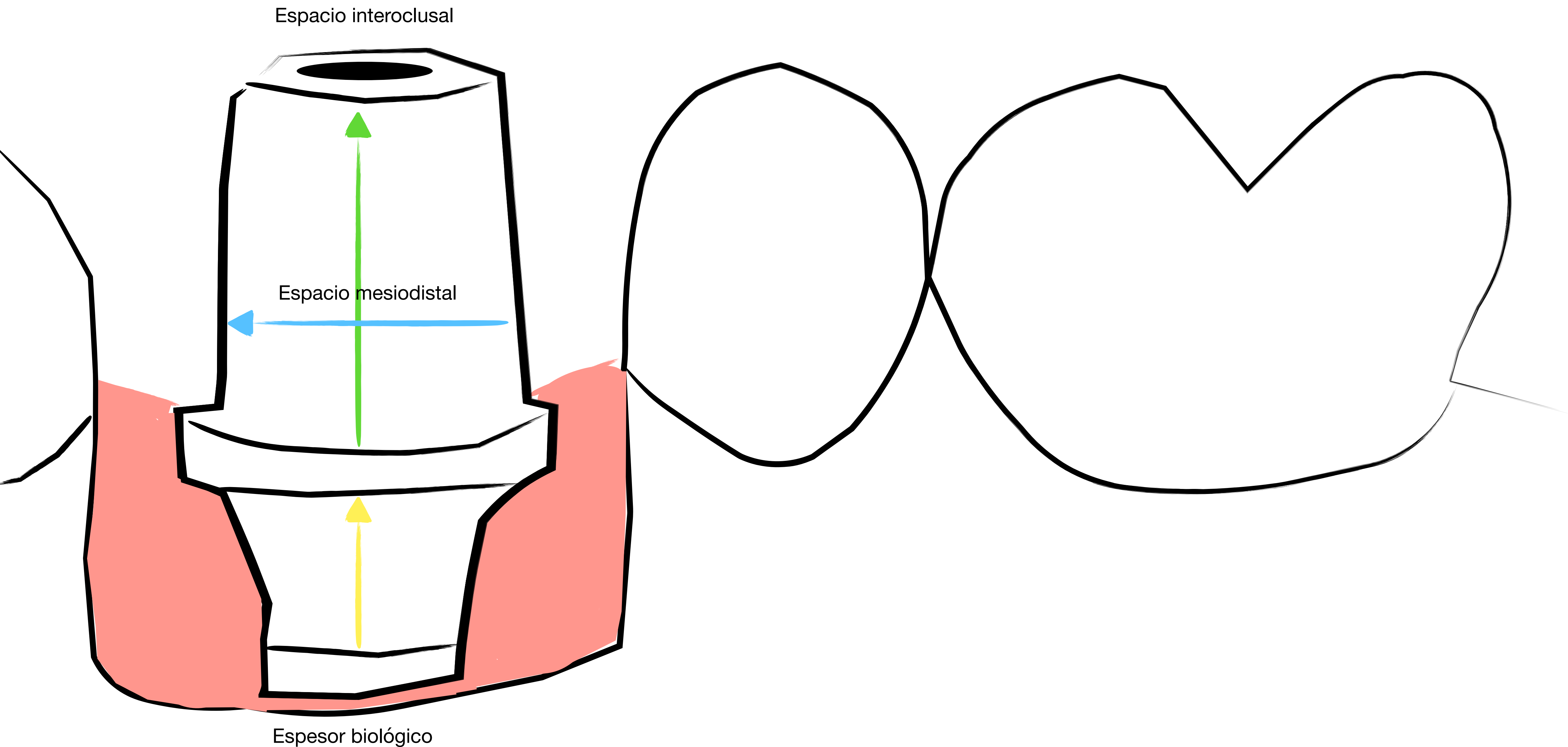


Aditamentos Protésicos

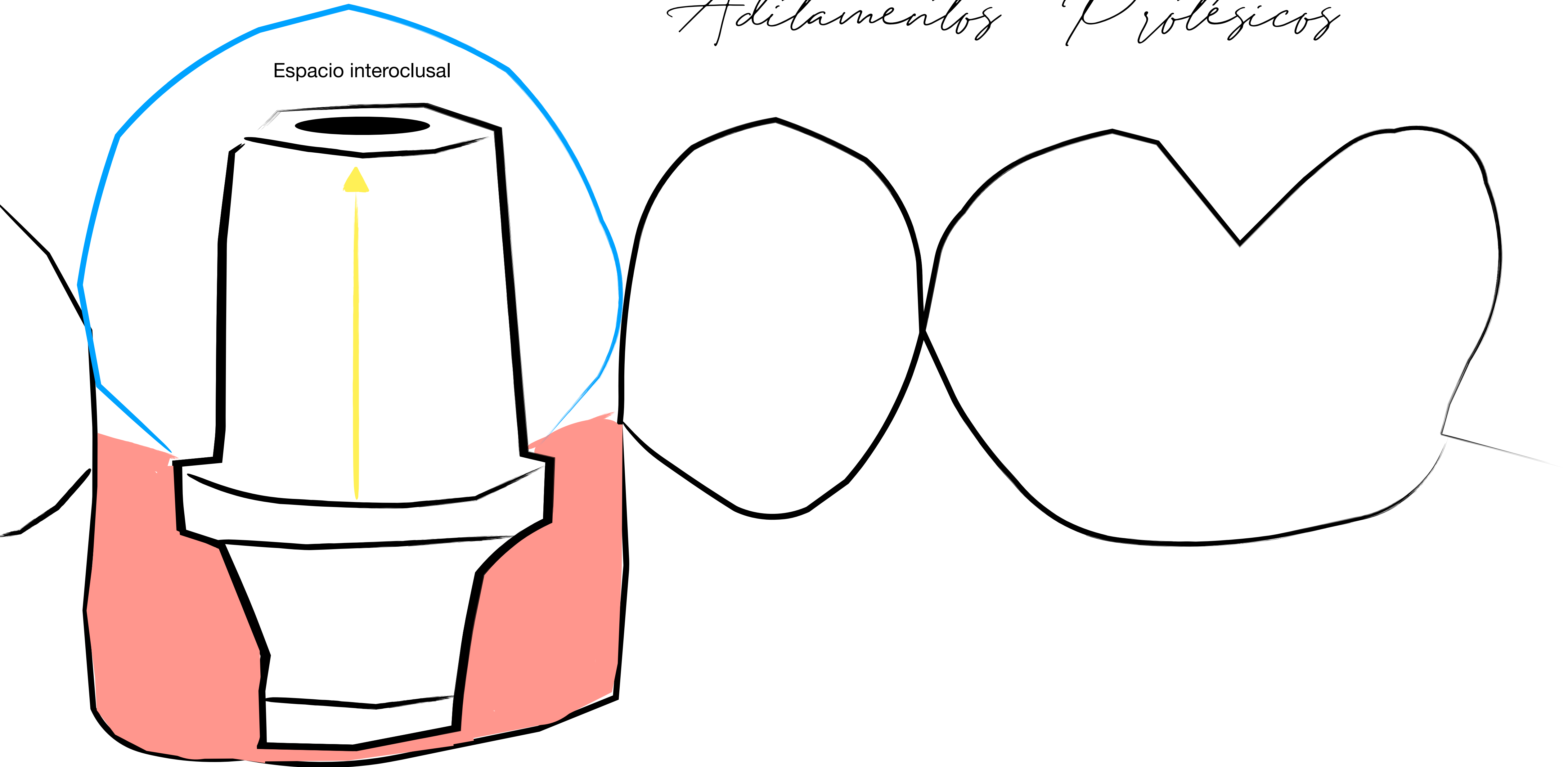


Aditamentos Protésicos


Espacio interoclusal

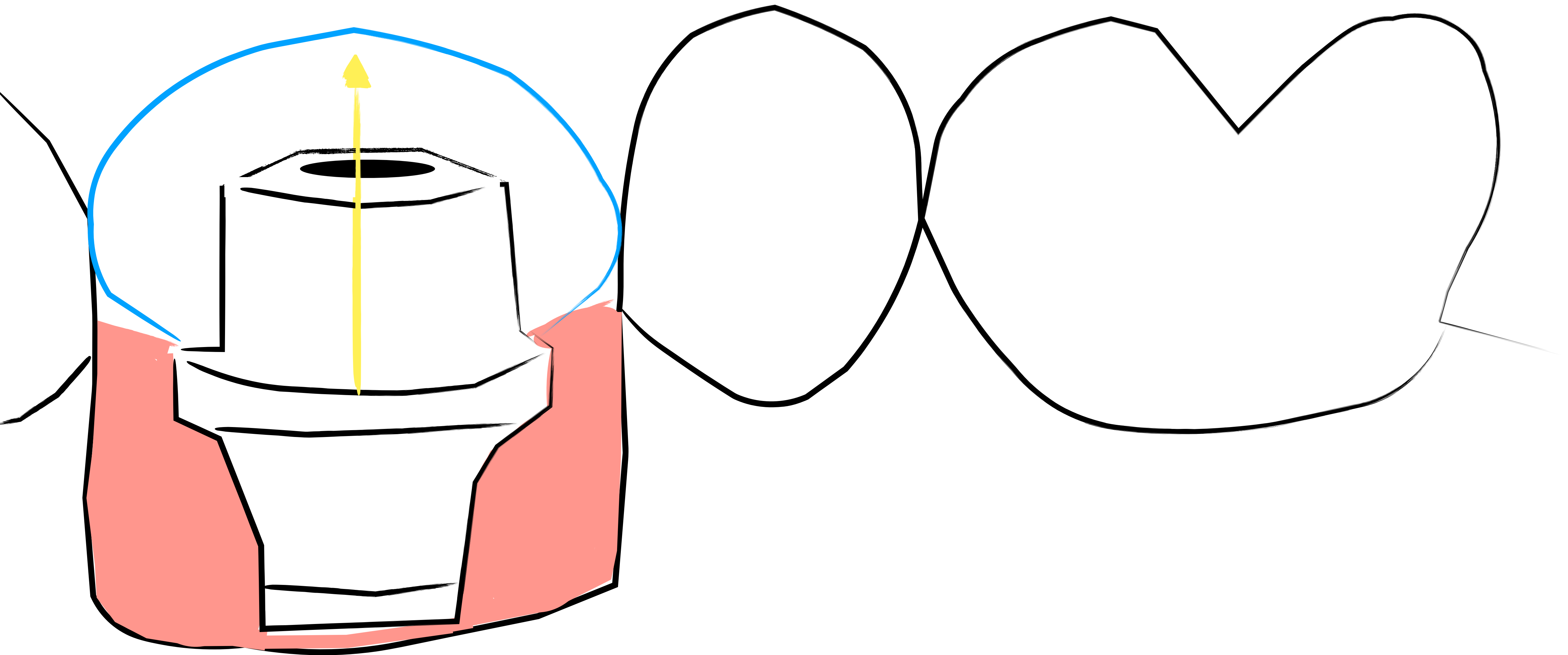


Aditamentos Protésicos

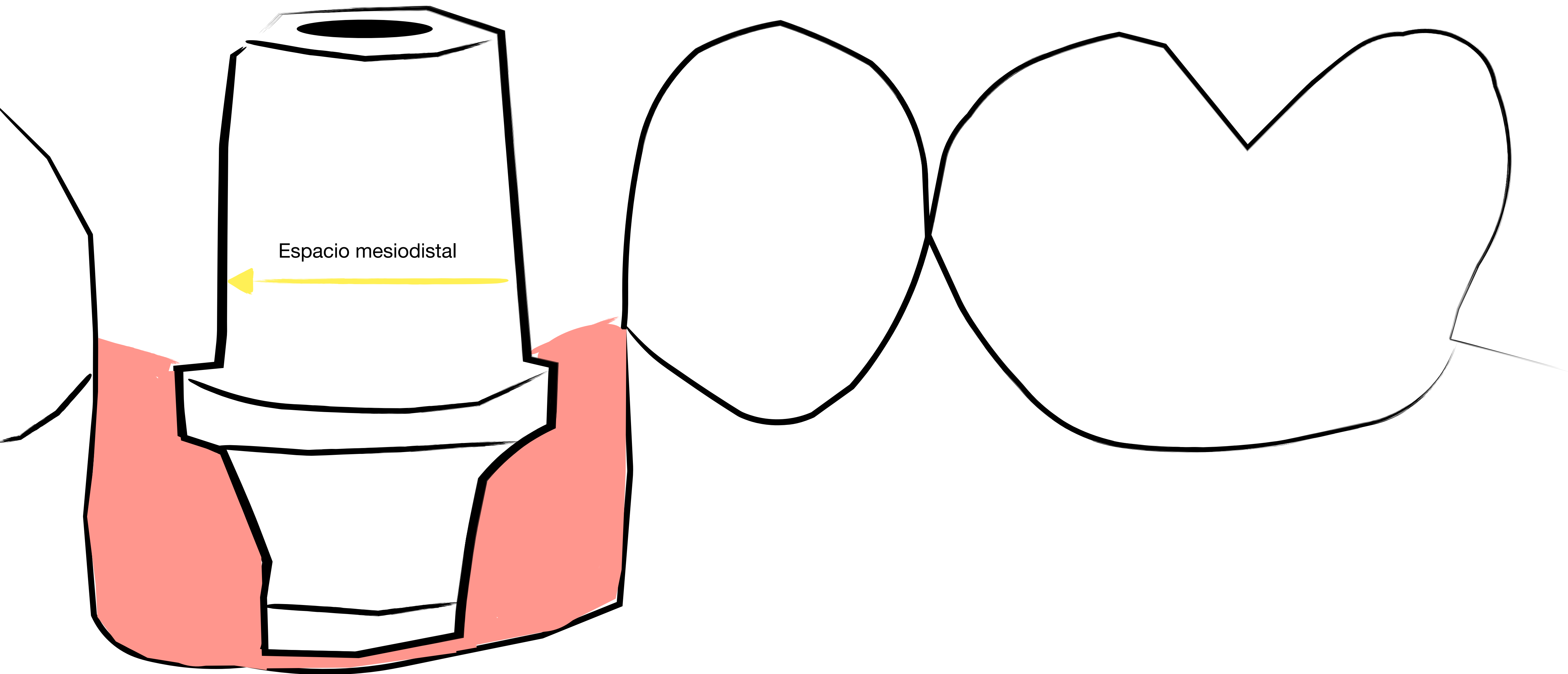

Aditamentos Protésicos

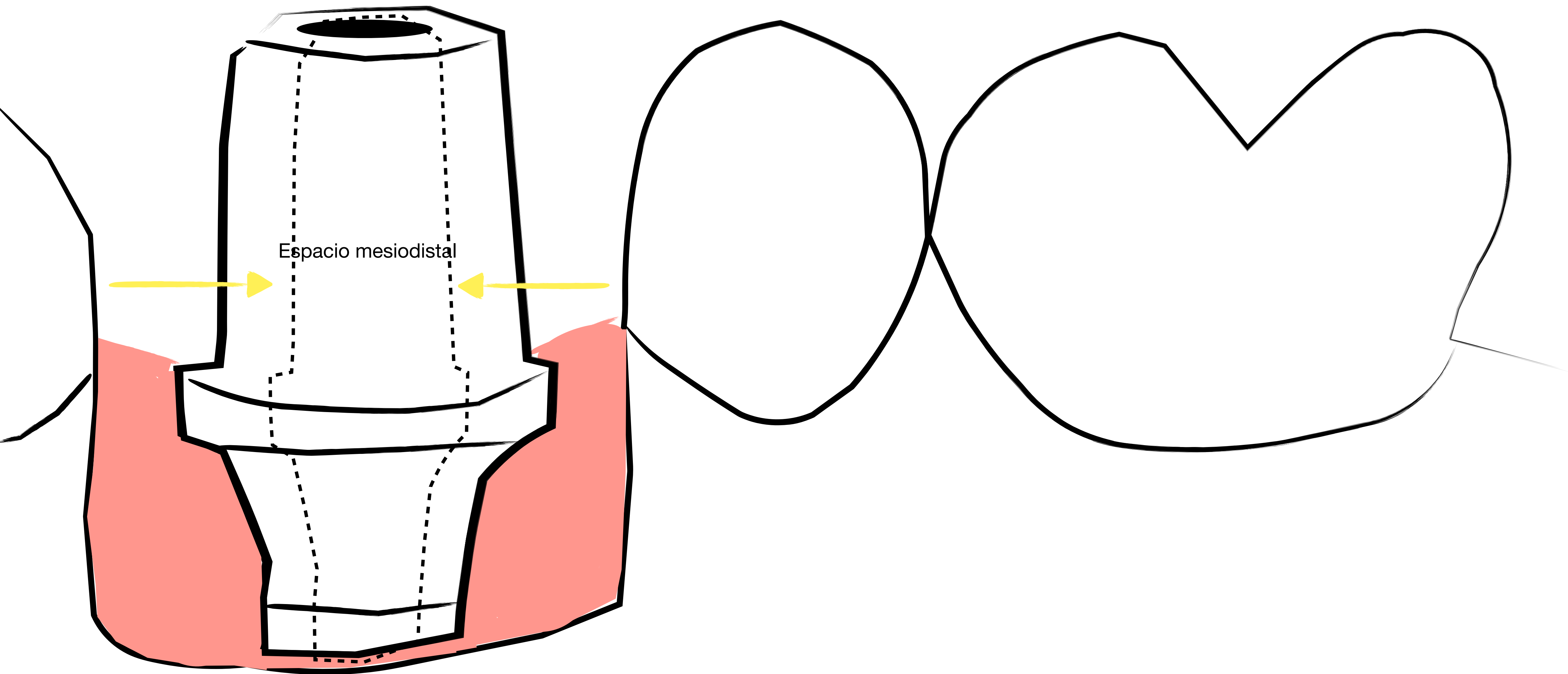


Aditamentos Protésicos

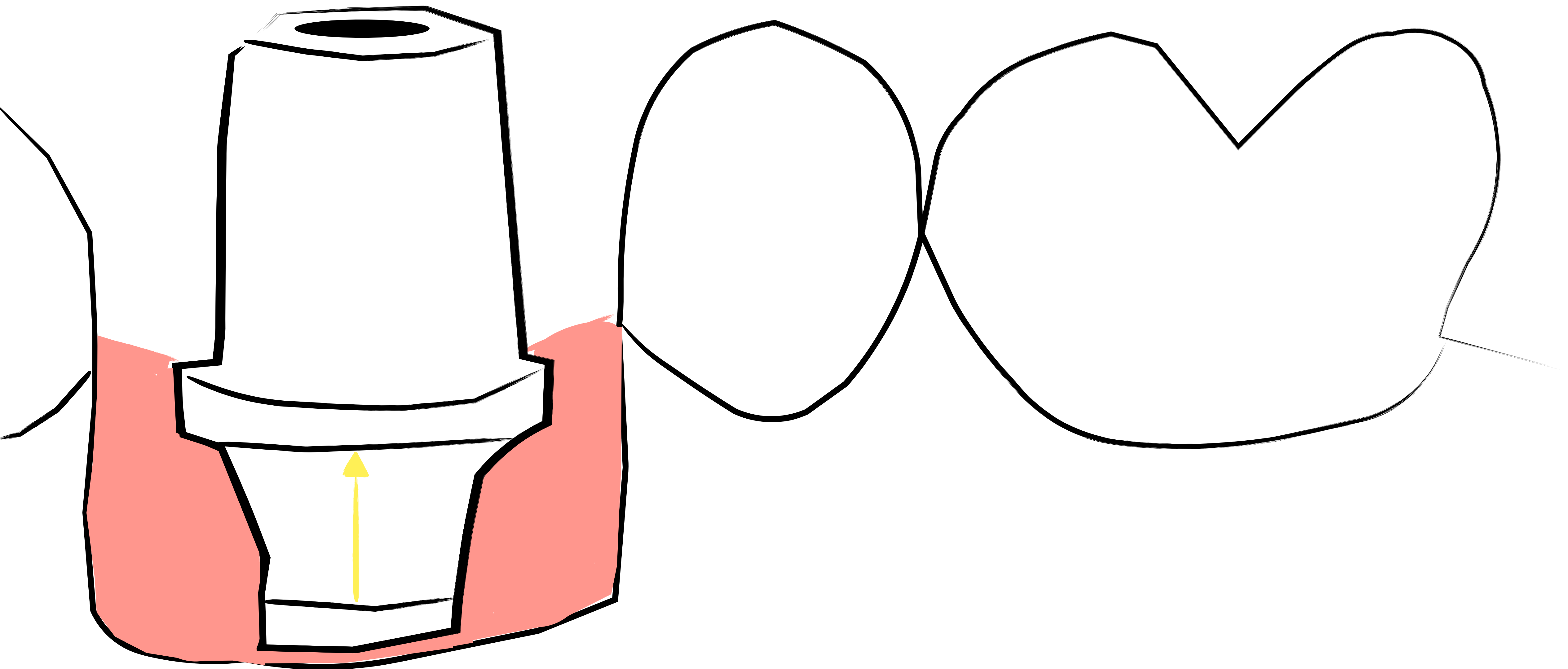

Espesor biológico


Aditamentos Protésicos

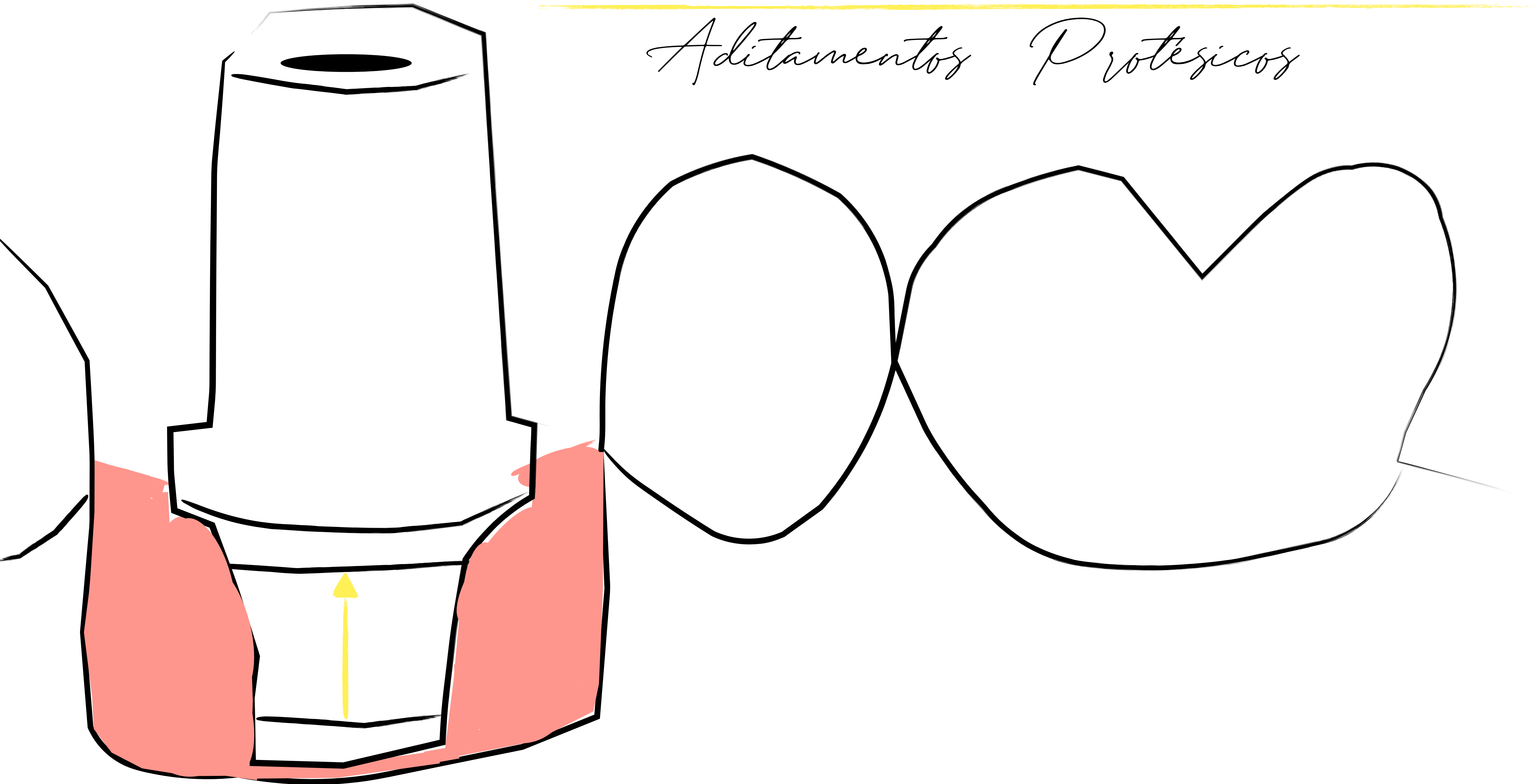



Espesor biológico

Aditamentos Protésicos

El medidor de altura de GM se utiliza para comprobar y seleccionar la altura gingival correcta del pilar.

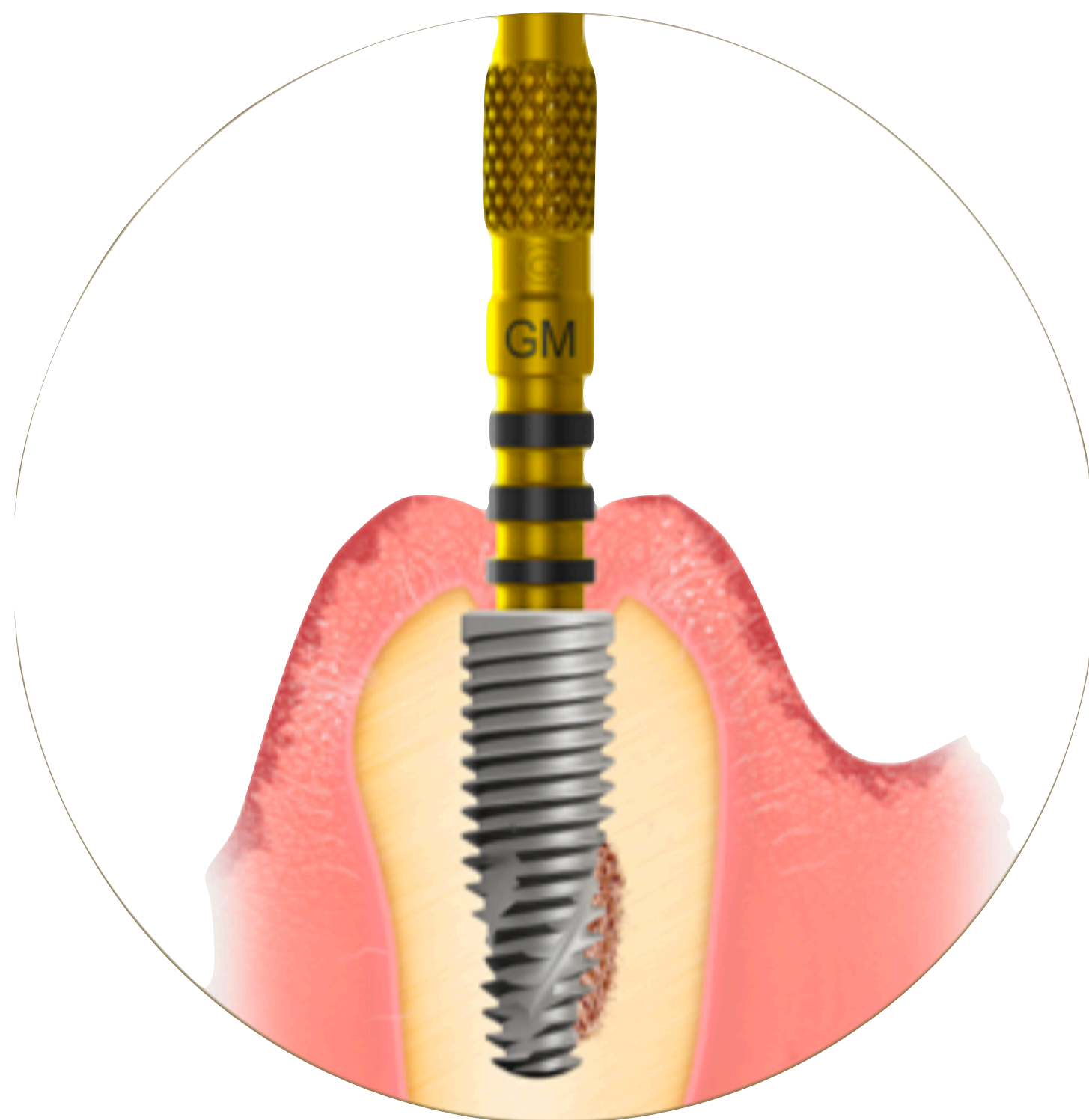

Neodent

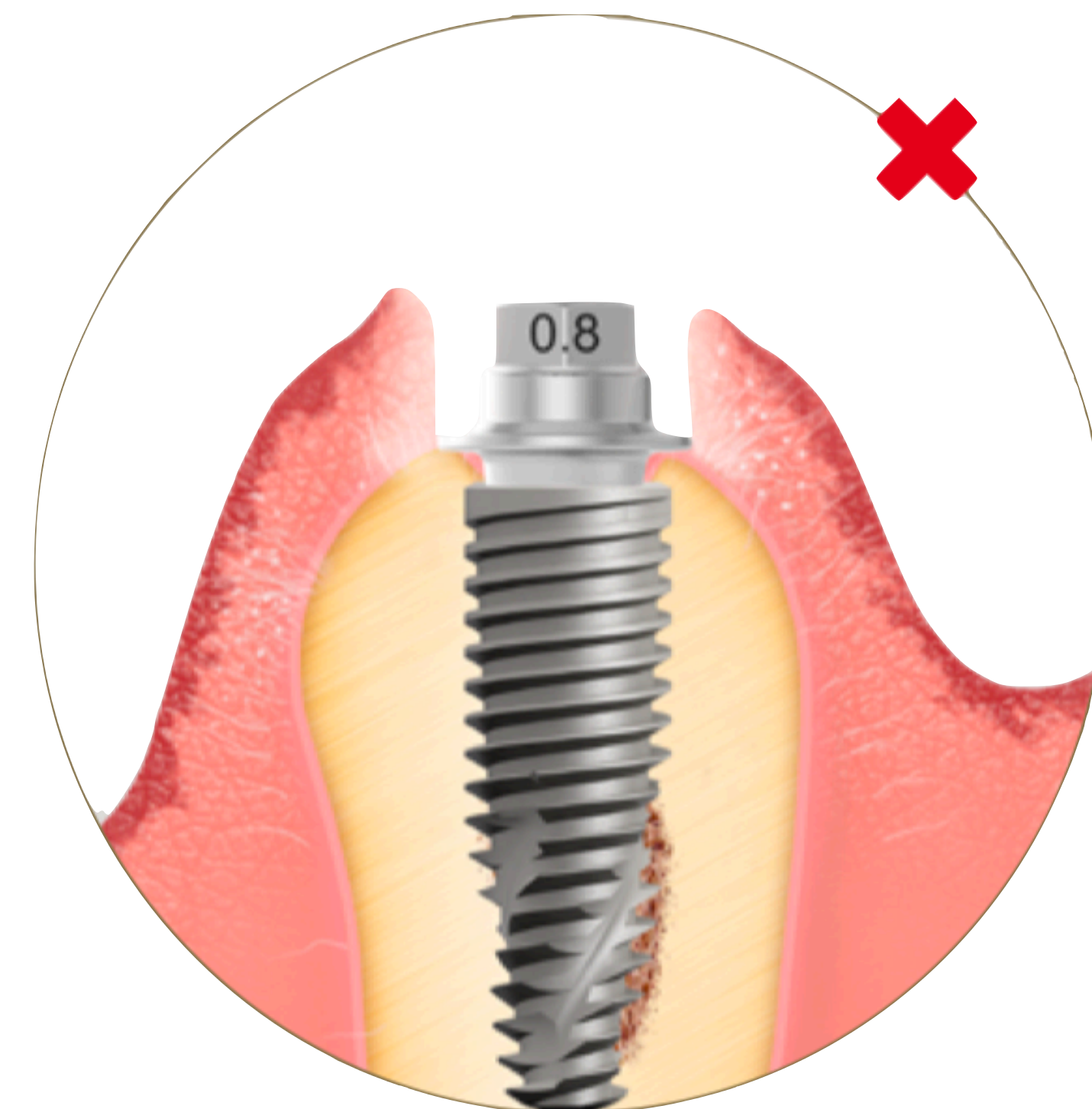
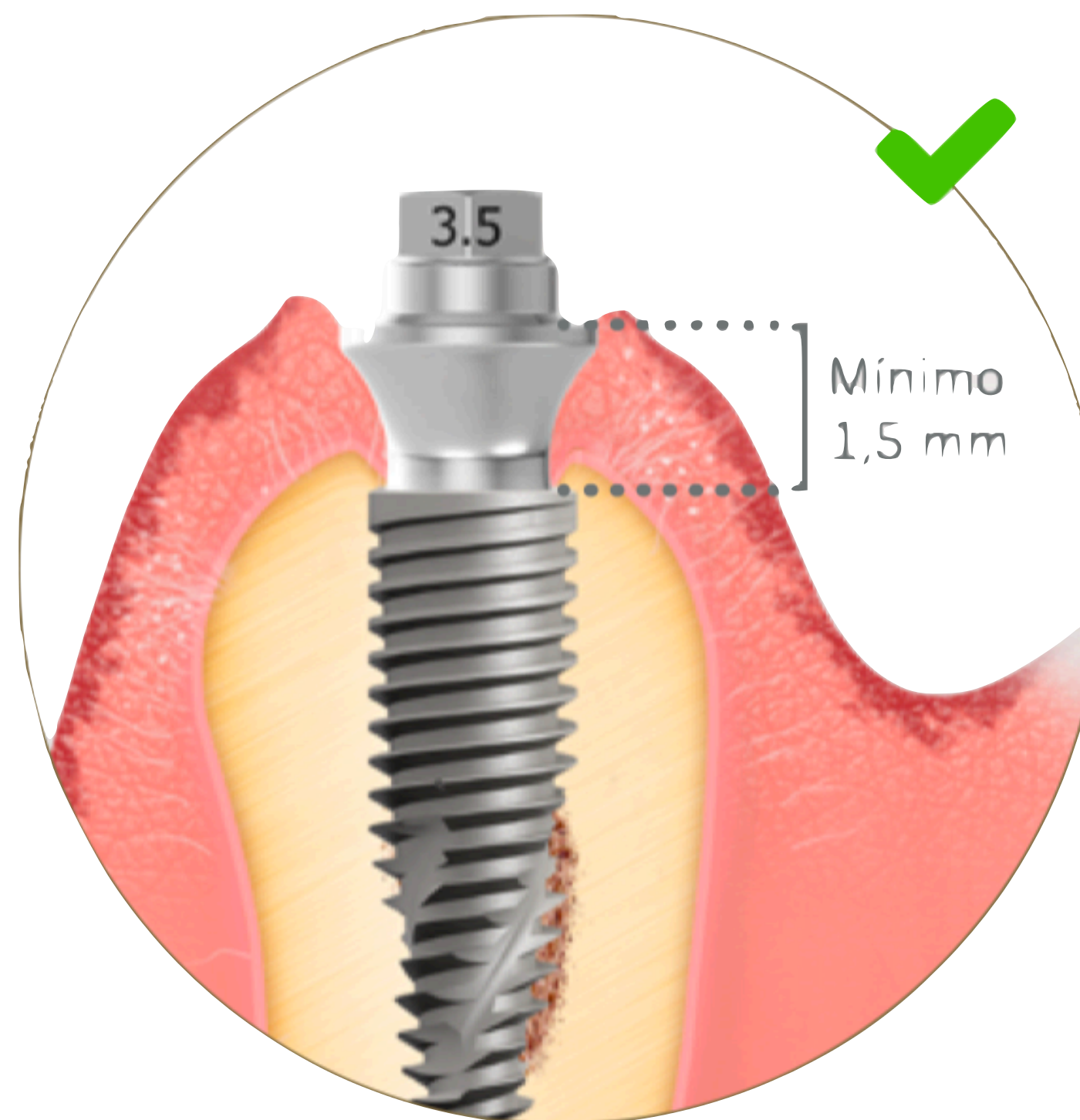


El margen del pilar debe alejarse por lo menos 1,5 mm de la cresta ósea y no más de 2mm por debajo de la mucosa. Las imágenes siguientes ilustran diferentes situaciones y la posición final correcta del pilar.


Aditamentos Protésicos

La selección del ancho del aditamento depende del espacio mesiodistal

Resultado Estetico
SUGESTÃO
Transmucoso = gengiva – 1mm

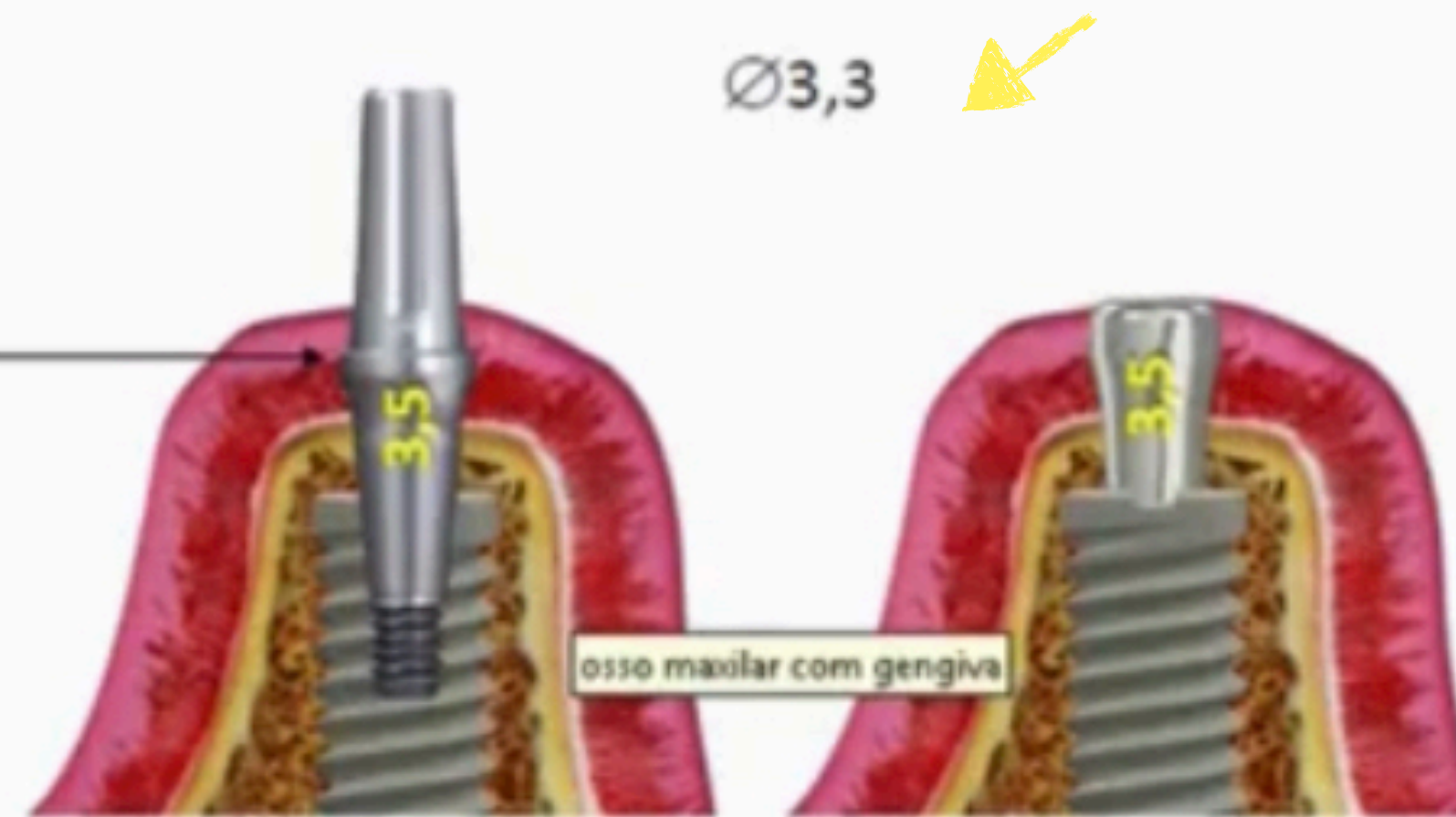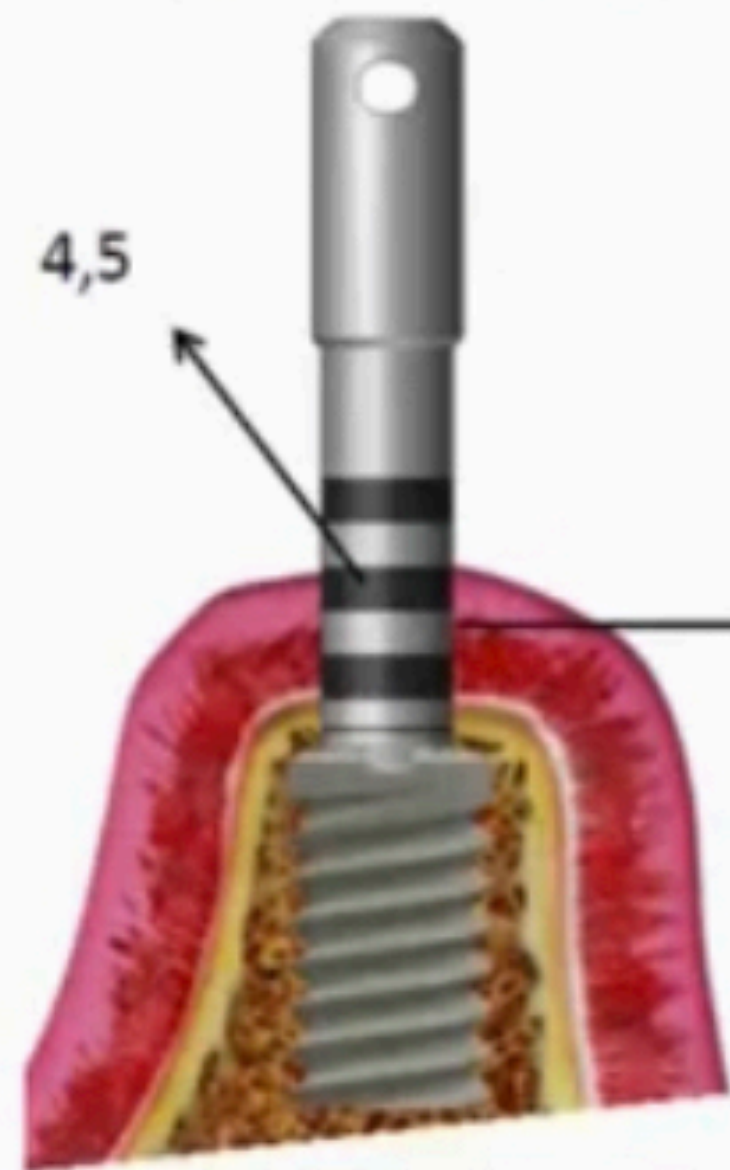

La selección del ancho del aditamento depende del espacio mesiodistal

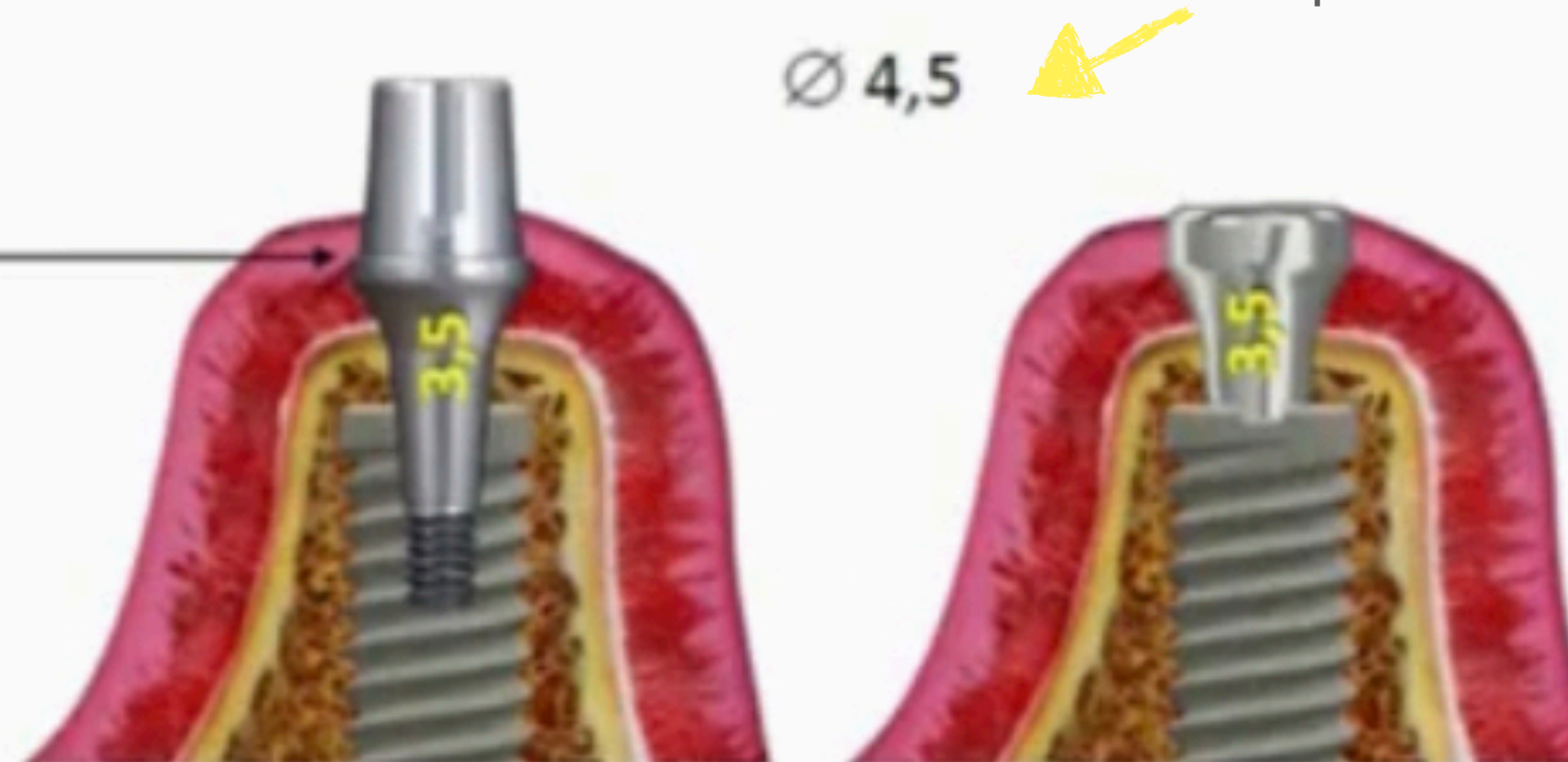


Biotipo gingival y
altura gingival



Selección del aditamento menos 1 mm

Aditamentos Protésicos

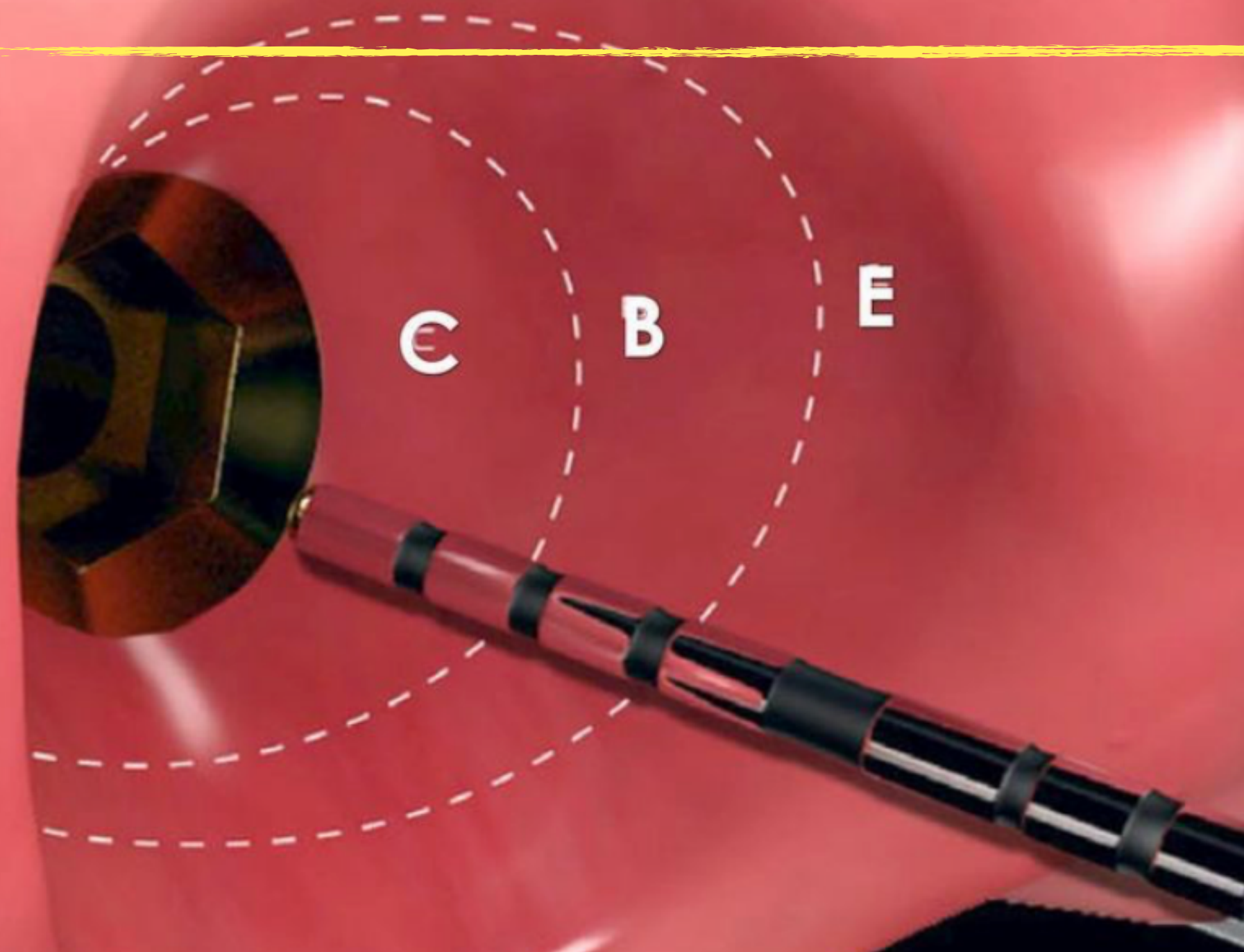

C-Crestal zone

B-Bounded zone

E-Esthetic zone

Biotipo gingival y
altura gingival



Selección del aditamento menos 1 mm



Aditamentos Protésicos



Aditamentos Protésicos

HEALING ABUTMENTS*

Ø 4.0



CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CODE	HA-D4-CH1.5-CS	HA-D4-CH2.5-CS	HA-D4-CH3.5-CS	HA-D4-CH4.5-CS	HA-D4-CH5.5-CS
REF. NO.	3401	3402	3403	3404	3405

Ø 4.9



CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CODE	HA-D4.9-CH1.5-CS	HA-D4.9-CH2.5-CS	HA-D4.9-CH3.5-CS	HA-D4.9-CH4.5-CS	HA-D4.9-CH5.5-CS
REF. NO.	3407	3408	3409	3410	3411

Ø 6.2



CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm
CODE	HA-D6.2-CH1.5-CS	HA-D6.2-CH2.5-CS
REF. NO.	3412	3413

* Recommended closing torque: 10Ncm max.

Aditamentos Protésicos

Nivel de trabajo Para prótesis de implantes dentales


| PILAR UNIVERSAL GM EXACT CLICK

El pilar universal GM Exact Click está pensado para el uso con prótesis unitarias cementadas. Tiene un sistema de click que ayuda en la impresión y la cementación/fabricación de las prótesis provisionales. El pilar universal GM Exact Click está disponible en diferentes dimensiones, como se indica a continuación:




El sistema en clic se reproduce en todos los análogos y cilindros acrílicos para coronas provisionales. Además, los análogos y transfers convencionales se identifican con colores de acuerdo a la altura del área cementable (violeta para 4 mm y verde para 6 mm), como se expone a continuación. Los análogos reposicionables híbridos también pueden utilizarse en este flujo de trabajo, pero para esta solución no se aplica ningún color diferente.


El pilar universal GM Exact Click está disponible en diferentes ángulos (recto, 17° y 30°) para todas las dimensiones ofrecidas. Los pilares angulados permiten diferentes alturas gingivales, como se muestra a continuación.

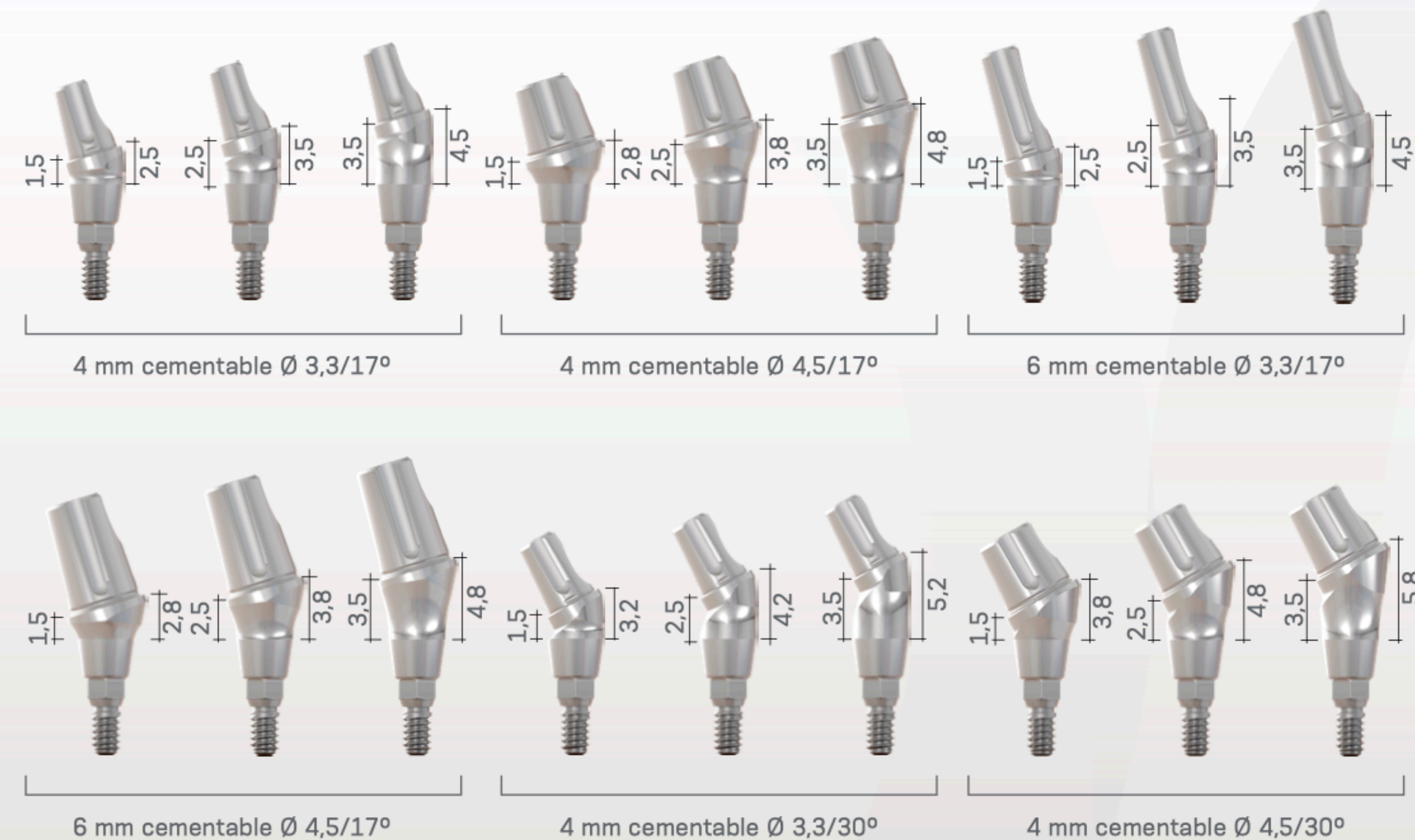

Aditamentos Protésicos

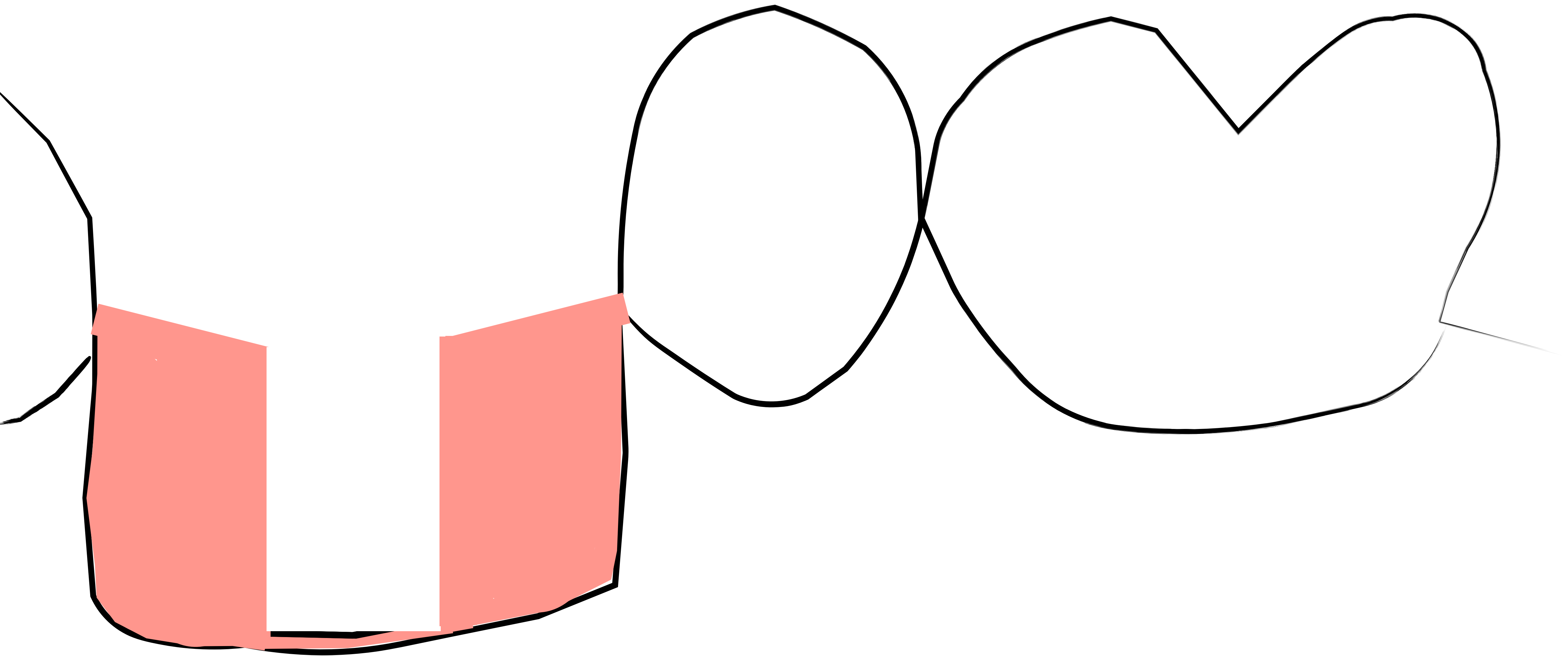

Aditamentos Protésicos

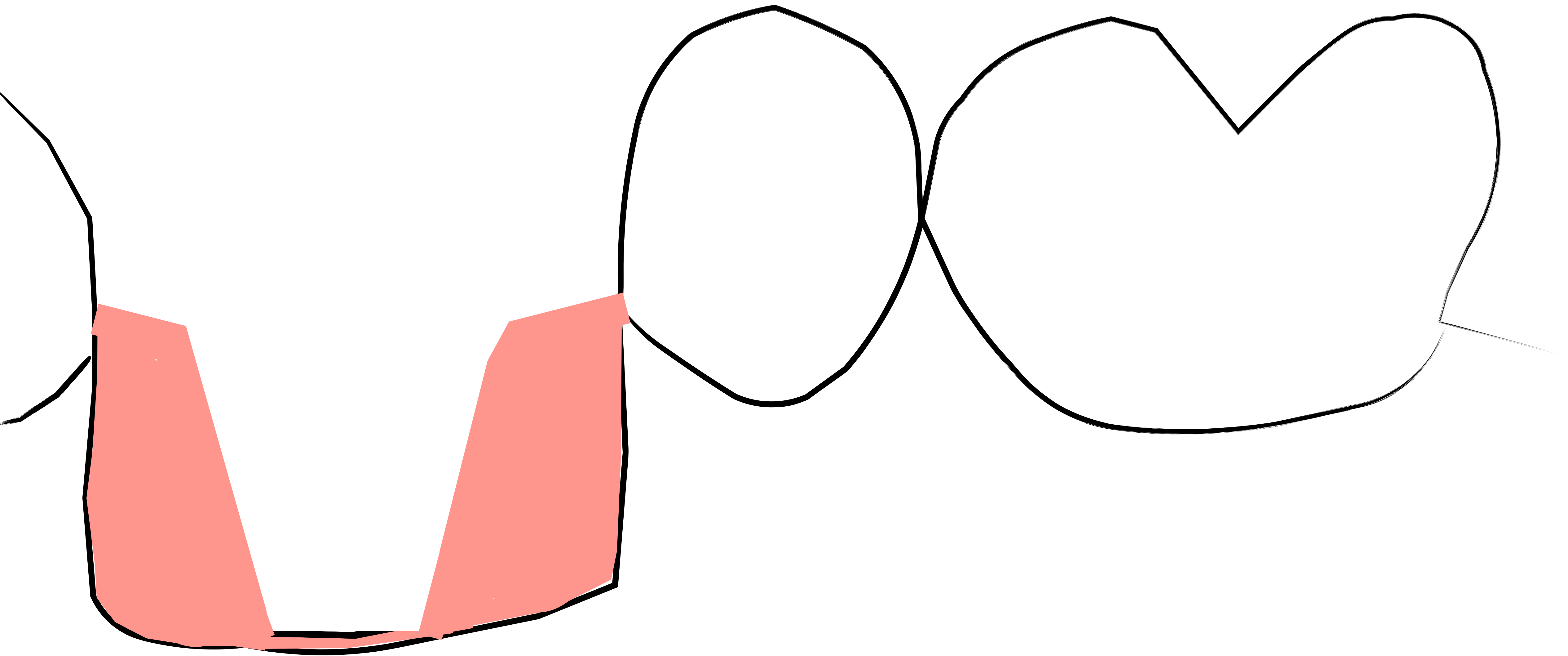

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares

Por su conexión

Externa

Interna

Hexágono interno

Cono morse

Trichanel

Octagonal

Por su retención

Cementado

Atornillado

Cemento-atornillado

Por su relación axial
con el cuerpo del
implante

Rectos

Angulados

Por su material de
confección

Metálicos

Plásticos

Cerámicos

Por su tipo de
elaboración

Prefabricados

Lab

Maquinados

Aditamentos Protésicos

AlphaBio

Clasificación de los pilares Por su conexión

neo



Spiral*



CONNECTION	Conical Hex, Internal Hex	Internal Hex
BONE TYPES	II, III, IV	III, IV
UNIQUE DESIGN FEATURES	- Tapered - Apical part with centering and anchoring features - Two micro threads - Platform switching	- Osteotome-like condensing body - Pronounced tapered core - Apical part with sharp deep threads
CLINICAL BENEFITS	- Optimal primary stability - High bone preservation - Micro threads for 20% increased surface area - Increased early BIC	- High bone condensation - High initial stability - Self-drilling - Redirection ability during placement - Penetration to small diameters

JICE



NICE



DFI



ATID




Internal Hex	Conical Hex	Internal Hex	Internal Hex
I, II, III, IV		I, II, III	I, II
- Moderately tapered - Back tapered coronal part** - Split coronal micro threads		- Slightly tapered - Double thread design with variable threads - Apex with cutting flutes	- Cylindrical - Parallel walls - Uniformed threads - High surface area
- Improved stress distribution - Supports wide range of clinical cases - Controlled bone penetration		- Easily stabilized and controlled during placement - Long-term stability - Large surface area	- Increased BIC - Minimal pressure on bone - Homogenic insertion

Aditamentos Protésicos

IMPLANT PLATFORMS

Alpha-Bio Tec's portfolio consists of two platforms, Internal Hex and Conical Hex. The Internal Hex platform includes all the traditional well-known implant systems, which allow a simple and efficient practice for the restoration procedure as all implants fit the same prosthetic line. The different systems cover various clinical cases, from the simplest to the most complicated ones.

Our Conical Hex platform provides solutions for narrow alveolar ridges and limited spaces as well as for cases requiring high level of esthetics. The development focused on a design that preserves the soft tissue and enhances esthetic results. In addition, the conical connection improves the implant-abutment fit.

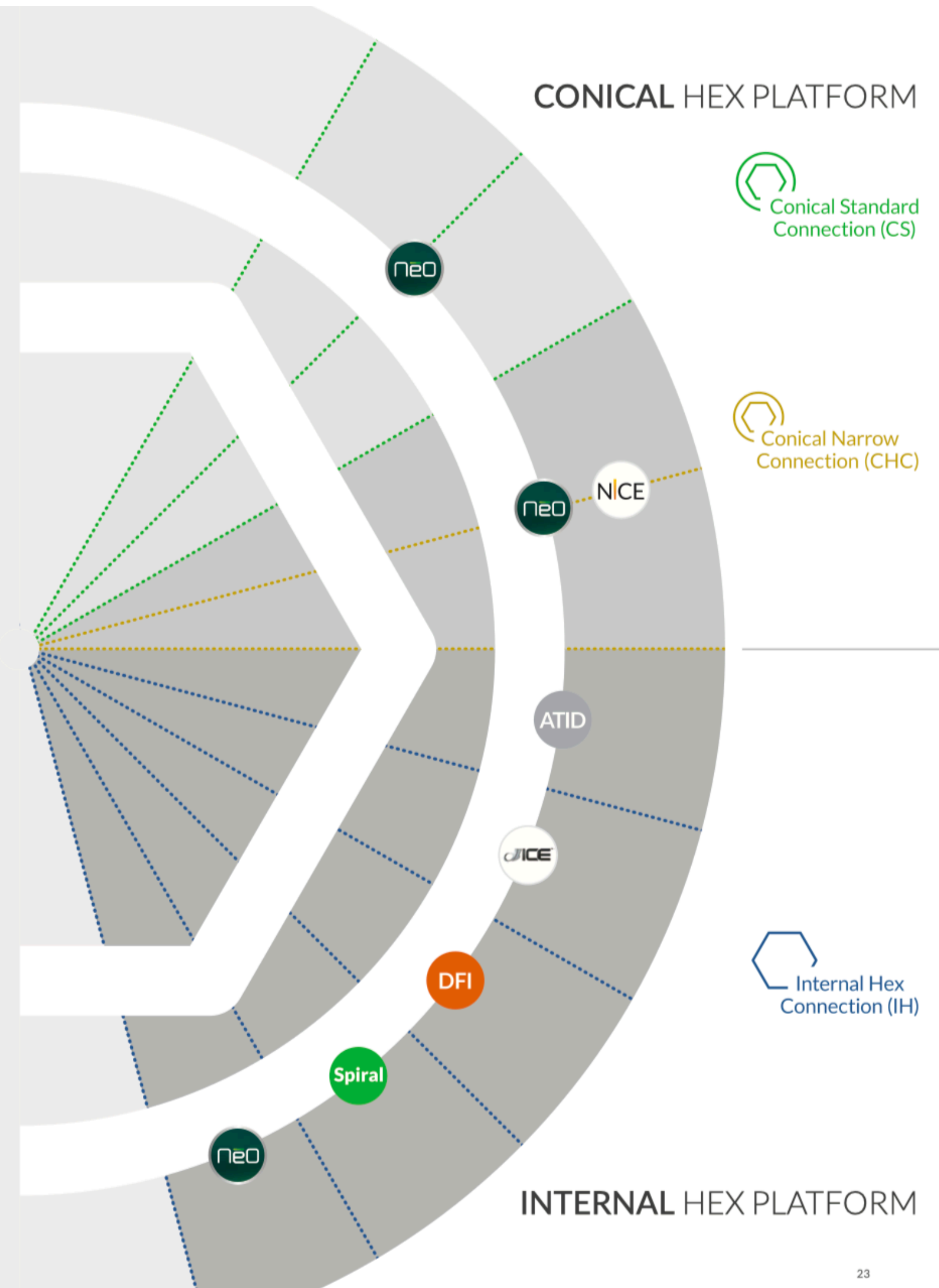

Clasificación de los pilares Por su conexión



CONEXIÓN INTERNA

Al igual que los implantes de conexión externa, la geometría de estos es muy variada (hexagonal, triangular, cono, etc).

Aditamentos Protésicos

SCREW-RETAINED RESTORATION

ALPHA
UNIVERSE MULTI UNIT
ABUTMENTS

MULTI-UNIT ANGLED ABUTMENTS


	17°			
	CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	CODE	AU 17-1.5-CHC	AU 17-2.5-CHC	AU 17-3.5-CHC
	REF. NO.	7482	7483	7484
	INSTRUCTIONS	Use 1.25 mm driver. Use 20 Ncm to tighten the abutment screw (see page 20).		

	30°			
	CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	CODE	AU 30-1.5-CHC	AU 30-2.5-CHC	AU 30-3.5-CHC
	REF. NO.	7487	7488	7489
	INSTRUCTIONS	Use 1.25 mm driver. Use 20 Ncm to tighten the abutment screw (see page 20).		

HEALING ABUTMENTS

	CUFF HEIGHT	4 mm	6 mm
	CODE	HCT4-N	HCT6-N
	REF. NO.	5236	5237
	INSTRUCTIONS	Provided with an integral screw. Recommended closing torques 10 Ncm.	

TRANSFERS AND ANALOG

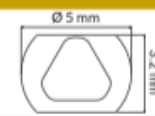			
	TYPE	Open Tray Transfer	
	CODE	TST-N	TCT-N-R
	REF. NO.	5231 (Engaged) △	5248 (Non-engaged) ○
	INSTRUCTIONS	Provided with 6012 screw. Recommended to close manually.	
	TYPE	Closed Tray Transfer	
	CODE	TS-N	
	REF. NO.	5235	
	INSTRUCTIONS	Recommended to close manually.	
	TYPE	Analog	
	MATERIAL	Titanium	
	CODE	BTT-N	
	REF. NO.	5211	

SCREW-RETAINED RESTORATION

Conical Narrow
Connection (CHC)

CONICAL HEX CONNECTION

MULTI-UNIT STRAIGHT ABUTMENTS - FOR RESTORATION UP TO 30°

	CUFF HEIGHT	0.75 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
	CODE	TCT-N 0.75-CHC	TCT-N 1.5-CHC	TCT-N 2.5-CHC	TCT-N 3.5-CHC	TCT-N 4.5-CHC	TCT-N 5.5-CHC
	REF. NO.	5242	5243	5244	5245	5246	5247
	INSTRUCTIONS	Use 1.5 mm driver for insertion (see page 20). Recommended closing torque: 20 Ncm.*					
		* Not recommended for single tooth restorations.					

TEMPORARY ABUTMENT

	MATERIAL	Titanium					
	CODE	TTA-N					
	REF. NO.	5216					
	INSTRUCTIONS	Recommended closing torque: 15 Ncm. Provided with 6092 screw.					

BURNOUT SLEEVES

	MATERIAL	Plastic		Plastic
	CODE	PST-N-AR		PST-N
	REF. NO.	5217 (Engaged) △		5218 (Non-engaged) ○
	INSTRUCTIONS	Recommended closing manually only (without tool). Provided with 6093 screw.		

SCREW FIXATION

	MATERIAL	Titanium		Black coated titanium
	CODE	SF-N		SFT-N
	REF. NO.	6092		6093
	INSTRUCTIONS	Use HTD 1.25 mm for insertion. Screw 6093 is for laboratory use only.		

MULTI UNIT ANGLED ABUTMENTS (TWO-PIECE)

Alpha-Bio Tec strongly encourages its customers to order the new designed AlphaUniverse Multi Unit parts. If the parts are still not available in your region, due to regulation restrictions, kindly use the below table for ordering:

ALPHA UNIBASE*				
	17°X2	17°X3	30°X2	30°X3
REF. NO.	7441	7442	7444	7445
PRO ALPHA UNICOVERS*				
CODE	AUC-T CT-N			
REF. NO.	5201			
SCREWS*				
CODE	USP		USL	
REF. NO.	5317		5318	

* For more information see Screw-retained Restoration Line brochure.

Clasificación de los pilares Por su conexión

Aditamentos Protésicos

CEMENT-RETAINED RESTORATION



TITANIUM ABUTMENTS*

	STRAIGHT Ø 4.5			
	HEIGHT	1.7 mm / 12.5 mm		1.7 mm / 8.5 mm
	CODE	TLAL	TLA	
	REF. NO.	5140	5030	

	STRAIGHT Ø 4.8			
	HEIGHT	1 mm / 8.9 mm	2 mm / 9.9 mm	3 mm / 10.9 mm
	CODE	TLASP1	TLASP2	TLASP3
	REF. NO.	5366	5367	5368

	SLIM Ø 3.85			
	HEIGHT	0.8 mm / 8.5 mm		0.5 mm / 8.5 mm
	CODE	TLAS	TLASSP	
	REF. NO.	5150	5403	

	WIDE - DIFFERENT DIAMETERS				
	DIAMETER	Ø 5.6	Ø 5.6	Ø 4.5	Ø 4.5
	HEIGHT	2 mm / 9.5 mm	4 mm / 11.5 mm	1.2 mm / 8.5 mm	3.2 mm / 8.5 mm
	CODE	TLAO2	TLAO4	TLAW	TLAWP
	REF. NO.	5182	5362	5340	5401

	ANGLED 15°			
	HEIGHT	1.7 mm / 8.5 mm	1.65 mm / 11.5 mm	2.3 mm / 8.5 mm
	CODE	TLA 15	TLAL 15	TLA 15B
	REF. NO.	5090	5092	5091

	ANGLED 25°			
	HEIGHT	1.8 mm / 8.5 mm		2.4 mm / 11.5 mm
	CODE	TLA 25		TLAL 25
	REF. NO.	5130		5134

	ANGLED 35°			
	HEIGHT	1.45 mm / 10 mm		
	CODE	TLA 35		
	REF. NO.	5136		

* Recommended closing torque: 30Ncm.

CEMENT-RETAINED RESTORATION



TEMPORARY ABUTMENTS

	STRAIGHT (PEEK ABUTMENTS)		
	CUFF HEIGHT	1 mm	2 mm
	CODE	TPA1	TPA2
	REF. NO.	5416	5417

	ANGLED 15° (PEEK ABUTMENTS)		
	CUFF HEIGHT	1 mm	2 mm
	CODE	TPA 15-1	TPA 15-2
	REF. NO.	5419	5420

	ANGLED 25° (PEEK ABUTMENTS)		
	CUFF HEIGHT	1 mm	2 mm
	CODE	TPA 25-1	TPA 25-2
	REF. NO.	5422	5423

	STRAIGHT (TITANIUM ABUTMENTS)		
	CUFF HEIGHT	1.7 mm	1.7 mm
	CODE	TLAC-AR	TLAC-R
	REF. NO.	5200 (Engaged)	5220 (Non-engaged)

Clasificación de los pilares Por su conexión

INTERNAL HEX CONNECTION

Aditamentos Protésicos

Conexión Grand Morse®


La conexión Grand Morse® Neodent® ofrece una combinación única basada en conceptos probados: una conmutación de plataforma switching con una conexión cono Morse profunda de 16°, incluyendo una indexación interna para una interfaz resistente y estable, diseñada para lograr resultados duraderos.



① **Indexación interna**
Posicionamiento preciso del pilar, protección contra la rotación y manejo práctico.




② **Platform Switching**
Diseño del pilar con un diámetro más estrecho que el área coronal del implante, permitiendo el concepto de plataforma switching.⁽⁵⁻⁹⁾

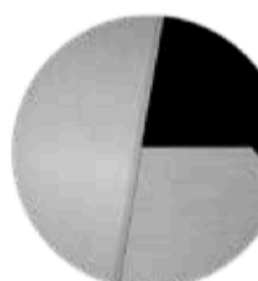

③ **Conexión profunda**
Posibilita un área de contacto extensa entre el pilar y el implante para una distribución óptima de cargas.



④ **Conexión cono Morse 16°**
Diseñada para asegurar un ajuste perfecto y sellado óptimo de la conexión.

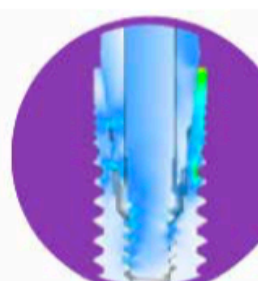

Drive CM

PRODUCT FEATURES:

Implants Description:

- Implant with conical central core;
- Square shape threads;
- Double threaded implant;
- Reverse cutting chambers distributed across the implant body;
- Rounded apex with a sharp edge;
- Cone Morse Connection.

Indications:

- Indicated for bone types III and IV and implant immediate placement post-extraction;

Drilling features:

- Final pilot drill is optional in bone types III and IV;
- Implant should be positioned 1-2 mm below bone level;
- Drilling speed: 500-800 rpm;
- Implant insertion speed: 30 rpm;
- Maximum torque for implant placement: 60 N.cm.



Aditamentos Protésicos

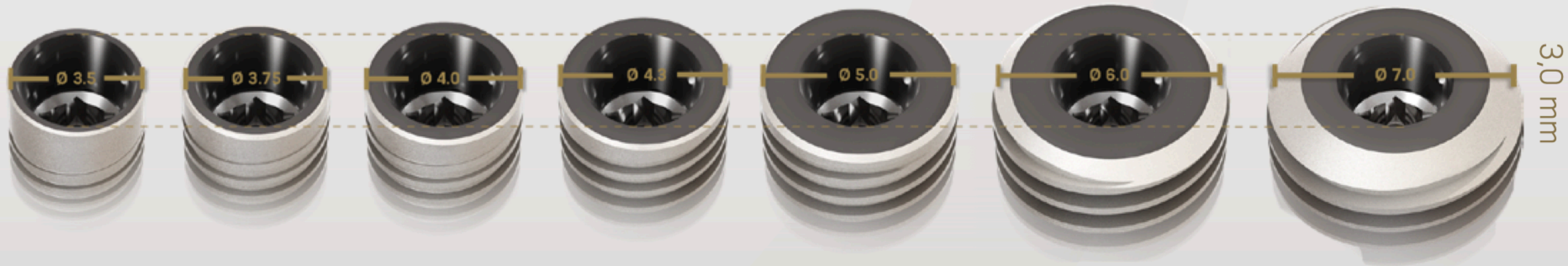


FIGURA 2. Todas las conexiones de implantes Neodent® Grand Morse® tienen las mismas dimensiones, independientemente del diámetro del implante, lo cual se traduce en un proceso protésico más sencillo.

Prostodoncia

Tissue Level NNC57

Narrow Neck CrossFit® (NNC)	58
Coronas y puentes	58
Pilares macizos	63
Híbrido	64

Tissue Level RN71

Regular Neck (RN) synOcta®	72
Coronas y puentes	72
Pilares macizos	79
Híbrido	82

Tissue Level WN93

Wide Neck (WN) synOcta®	94
Coronas y puentes	94
Pilares macizos	101
Híbrido	103
Ayudas para la planificación prostodóntica (NNC, RN, WN)	109
PLAN Pilares	109

Bone Level Tapered SC113

Small CrossFit® (SC)	114
Coronas	114

Bone Level y Bone Level Tapered NC117

Narrow CrossFit® (NC)	118
Coronas y puentes	118
Híbrido	136

Bone Level y Bone Level Tapered RC145

Regular CrossFit® (RC)	146
Coronas y puentes	146
Híbrido	163
Ayudas para la planificación prostodóntica (NC, RC)	172
PLAN Pilares	172

Bone level- Plataforma CrossFit

Straumann® Dental Implant System	Ø 2.9 mm		Ø 3.3 mm		Ø 3.3 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.8 mm		Ø 4.8 mm	
	Small CrossFit (SL)		Bone Level (BL)		Bone Level Tapered (BLT)		Bone Level (BL)		Bone Level Tapered (BLT)		Bone Level (BL)		Bone Level Tapered (BLT)	
Implantes Roscoe® SLActive®	SC		BL		BLT		BL		BLT		BL		BLT	
	Ø 2.9 mm		Ø 3.3 mm		Ø 3.3 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.8 mm		Ø 4.8 mm	
	8 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
	12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm	
	14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm	
Implantes Roscoe® SLA®	SC		BL		BLT		BL		BLT		BL		BLT	
	Ø 2.9 mm		Ø 3.3 mm		Ø 3.3 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.1 mm		Ø 4.8 mm		Ø 4.8 mm	
	8 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
	12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm		12 mm	
	14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm		14 mm	
Fresa de Aguja y Fresas Redondas		Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")
Fresas Piloto y Helicoidales		Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")
Verificadores de Dirección y Medidores de Profundidad		Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm
Fresas de Perfil		Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")	Ø 1.6 mm (Ø 0.063") Ø 2.0 mm (Ø 0.079") Ø 2.5 mm (Ø 0.098")
Machos de Rosca (Para la Pieza de Mano y Adaptador para Llave de Carraca)		Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm
Tornillos de cierre y Pilares de Cicatrización		SC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm	NC Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm
Abreviaturas - Ø4 e V6: Implante con 4 piezas AP: Altura del Pilar AG: Altura Original A: Altura Ø: Ángulo SLActive®: Superficie química con arena de gran grueso y tratado con ácido químicamente activo e hidrofílico SLA®: Superficie química con arena de gran grueso y tratado con ácido Roscoe®: Es una abstracción de alto desempeño y resistencia superior a la del titanio puro con excelentes propiedades de osseointegración (Las imágenes de los productos no están en tamaño real) *Frecuencia sujeta a cambios sin previo aviso.														



straumann

Straumann® Dental Implant System	SC (Small CrossFit™)		NC (Narrow CrossFit™)		RC (Regular CrossFit™)		NC (Narrow CrossFit™)		RC (Regular CrossFit™)		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm		Ø 3.3 mm		Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	BONE LEVEL PRÓTESIS										
	EARS® Flujo Digital (CAD/CAM) Casquillos Wax-up										
	SC		NC		RC		NC		RC		
Pilares de Titanio/ Pilares con revestimiento ADLC	Cementada o Atornillada		Cementada		Cementada o Atornillada		Cementada		Cementada o Atornillada		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
Componentes de Impresión	A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
Componentes de Impresión para Flujo Digital	A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
Componentes de Impresión para flujo convencional	A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		A nivel del Pilar		A nivel del implante		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
Casquillos de Plástico (calcinables) aligamientos e insertos.	Casquillo de Plástico Calcinable para Variabasis SC		Casquillo de Plástico Calcinable para Variabasis NC		Casquillo de Plástico Calcinable para Variabasis RC		Casquillo de Plástico Calcinable para Variabasis NC		Casquillo de Plástico Calcinable para Variabasis RC		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
Casquillos Provisionales / Pilares Provisionales / Casquillos Protectores	Casquillo de Plástico Provisional		Casquillo de Plástico Provisional		Casquillo de Plástico Provisional		Casquillo de Plástico Provisional		Casquillo de Plástico Provisional		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
Componentes Auxiliares y Tornillos	Tornillo Ø 2.9 mm		Tornillo Ø 3.3 mm		Tornillo Ø 4.1 mm		Tornillo Ø 3.3 mm		Tornillo Ø 4.1 mm		Instrumentos para Cirugía y Prótesis
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		
	Ø 2.9 mm Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		Ø 3.3 mm Ø 4.1 mm Ø 4.6 mm		
	SC Variabasis®		Pilar Cementado		Pilar Atornillado		Pilar Variobasis®		Pilar Variobasis®		

Contacte a Straumann en:
Lago Alberto #139, Int. 1401
Col. Granada, C.P. 11520
Tel. +52 55 5262 6262
info.mex@straumann.com
www.straumann.com.mx

© Straumann AG 2013. Todos los derechos reservados.
Straumann® y los demás nombres comerciales y logotipos de Straumann®
registrados en el presente folleto son marcas comerciales de Straumann
o marcas registradas de Straumann Holding AG o sus filiales.

401727000000 01/2017

Tissue level- Plataforma SynOcta

Straumann® Dental Implant System		Ø 3.3 mm			Ø 4.1 mm			Ø 4.8 mm				
		Standard [I] Ø 4.8 mm	Standard Plus [P] Ø 4.8 mm	Tapered Effect [T] Ø 4.8 mm	Standard [I] Ø 4.8 mm	Standard Plus [P] Ø 4.8 mm	Tapered Effect [T] Ø 4.8 mm	Standard [I] Ø 4.8 mm	Standard Plus [P] Ø 4.8 mm	Standard [I] Ø 4.8 mm	Standard Plus [P] Ø 4.8 mm	Tapered Effect [T] Ø 4.8 mm
TISSUE LEVEL CIRUGÍA												
Implantes Roxolid® SLActive®	4 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6 mm	093.5925	093.5235	093.5215	093.5935	093.5625	093.5725	093.5935	093.5935	093.6025	093.6235	—
	8 mm	093.5935	093.5235	093.5225	093.5935	093.5625	093.5725	093.5935	093.5935	093.6025	093.6235	093.6235
	10 mm	093.5935	093.5235	093.5225	093.5935	093.5625	093.5725	093.5935	093.5935	093.6025	093.6235	093.6235
	12 mm	093.5935	093.5235	093.5240	093.5935	093.5640	093.5740	093.5935	093.5940	—	—	093.6240
Implantes Roxolid® SLA®	4 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6 mm	043.2555	043.2685	043.2690	043.2555	043.2625	043.2685	043.2625	043.2685	043.2675	043.2685	—
	8 mm	043.2565	043.2625	043.2625	043.2565	043.2625	043.2675	043.2565	043.2625	043.2675	043.2675	043.2685
	10 mm	043.2575	043.2625	043.2625	043.2575	043.2625	043.2675	043.2575	043.2625	043.2675	043.2675	043.2685
	12 mm	043.2585	043.2635	043.2675	043.2585	043.2635	043.2685	043.2585	043.2635	043.2685	043.2685	043.2685
Fresas Redondas												
Fresas Piloto y Helicoidales												
Verificadores de Dirección y Medidores de Profundidad												
Fresas de Perfil												
Machos de rosca (Para la pieza de mano)												
Tornillos de cierre y Casquillos de cicatrización												
RN RN RN WN												

Instrumentos para Cirugía y Prótesis		
	Copa Quirúrgica de titanio	040.205
	Adaptador para Suen de Carcasa	030.802
	Adaptador para pinos de mano	030.871
	Destornillador K25	030.800
	Destornillador K25 para pinos de mano	030.823
	Destornillador S4 para pinos de carcasa	040.787
	Destornillador S4 para pinos de mano	040.758
	Clave de Carcasa	030.232
	Desarmador para Suen de Carcasa	030.838
	Clave de Relección	030.814
	Indicador de Distancia TL	030.0803
	Caja de Protección Pin-Arch	030.0559
Instrumentos de Diagnóstico Prófisis e Instrumentales		
	T Diagnostica	040.247
	Kit Prófisis	Protegió una sesión de trabajo por diagnóstico
Instrumentos de Montaje, Desmontaje y extracción Muscular®		
	Instrumento de desmontaje para desmonte del montaje y ajuste de repuestos de carcasa	030.770.0790
	Instrumento de montaje/desmontaje para montaje/desmonte	030.770.0790
	Extractor del alojamiento de matriz	030.770.0790
	Caja de equipamiento, incluye 7 herramientas	030.233.0790
Modelos		
	Modelo 5.2	040.288

Contáctese a Straumann en:
 Lago Alberto #319, int. 340
 Col. Granada, C.P. 11520
 Del. Miguel Hidalgo
 Tel. +52 55 5282 6262
 01 800 752 2000
info.mx@straumann.com
www.straumann.com.mx

© Institut Straumann AG, 2020. Todos los derechos reservados. Straumann® y las demás marcas comerciales y logotipos de Straumann® mencionados en el presente folleto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Straumann Holding AG o sus filiales.



Who is who

Tissue Level

02-251701-0000 00-0000

Straumann® Dental Implant System	TISSUE LEVEL PRÓTESIS									
	RN (Regular Neck) Ø 4.8 mm									
Restauración Protésica	Barra		Atornillada		Atornillada o Cementada		Cementada	Macizo Cementada		
CARES® Flujo digital (CAD/CAM) Casquillos Wax-up										
Pilares de titanio										
Componentes de Transferencia	A nivel del pilar				A nivel del implante		A nivel del pilar	A nivel del implante		
Componentes de impresión para flujo digital (Scanbody)										
Componentes de Transferencia para flujo convencional										
Casquillos de Plástico Calcinables y Matrices										
Pilares Provisionales, Casquillos de Provisionalización y Casquillos Protectores.										
Tornillos y Componentes Auxiliares										

Abreviaciones

Aditamentos Protésicos

Angulados



Clasificación de los pilares


Por su relación axial con el cuerpo del implante

Rectos

Son pilares con una angulación de 0 grados con respecto al eje axial del implante, solo varía la altura gingival

Angulados


Se utilizan en aquellos casos dónde es necesario corregir la angulación, de manera que el tornillo De acceso no quede en posición favorable.

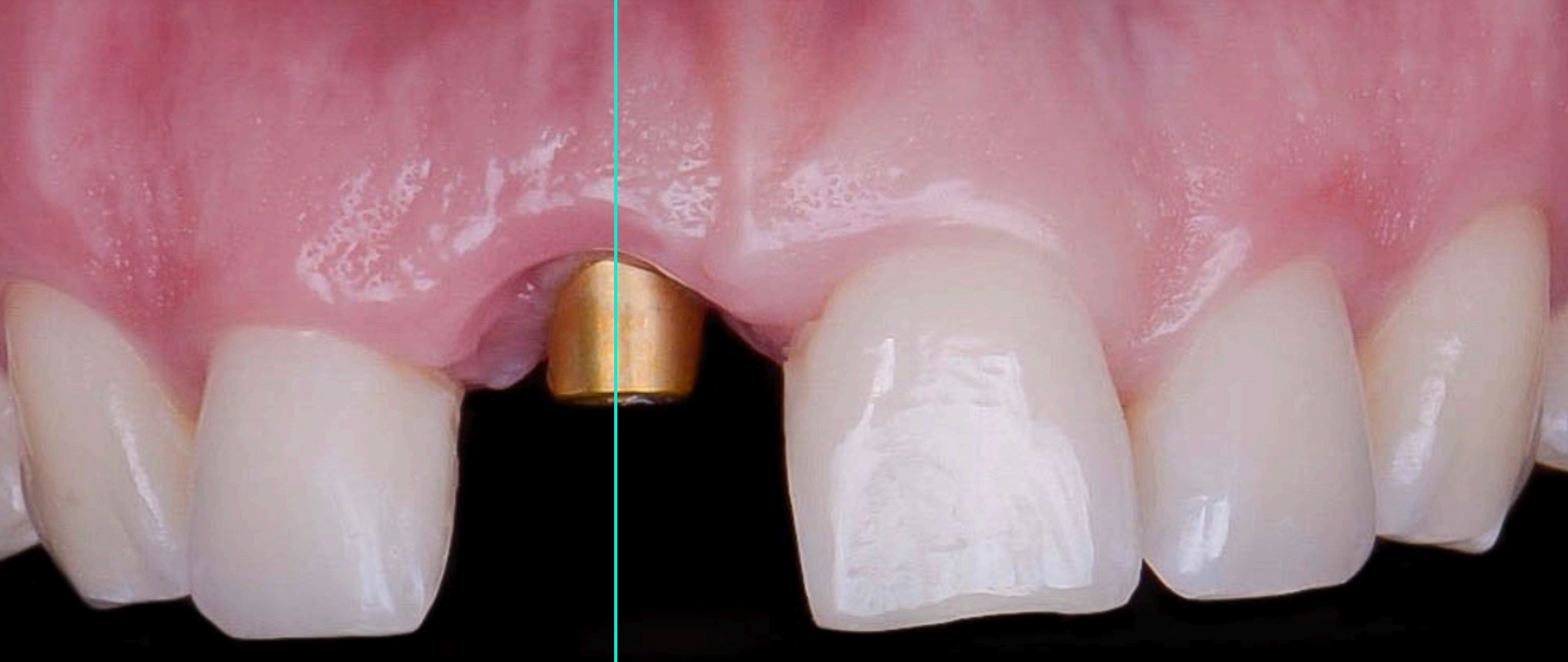

Aditamentos Protésicos



Aditamentos Protésicos

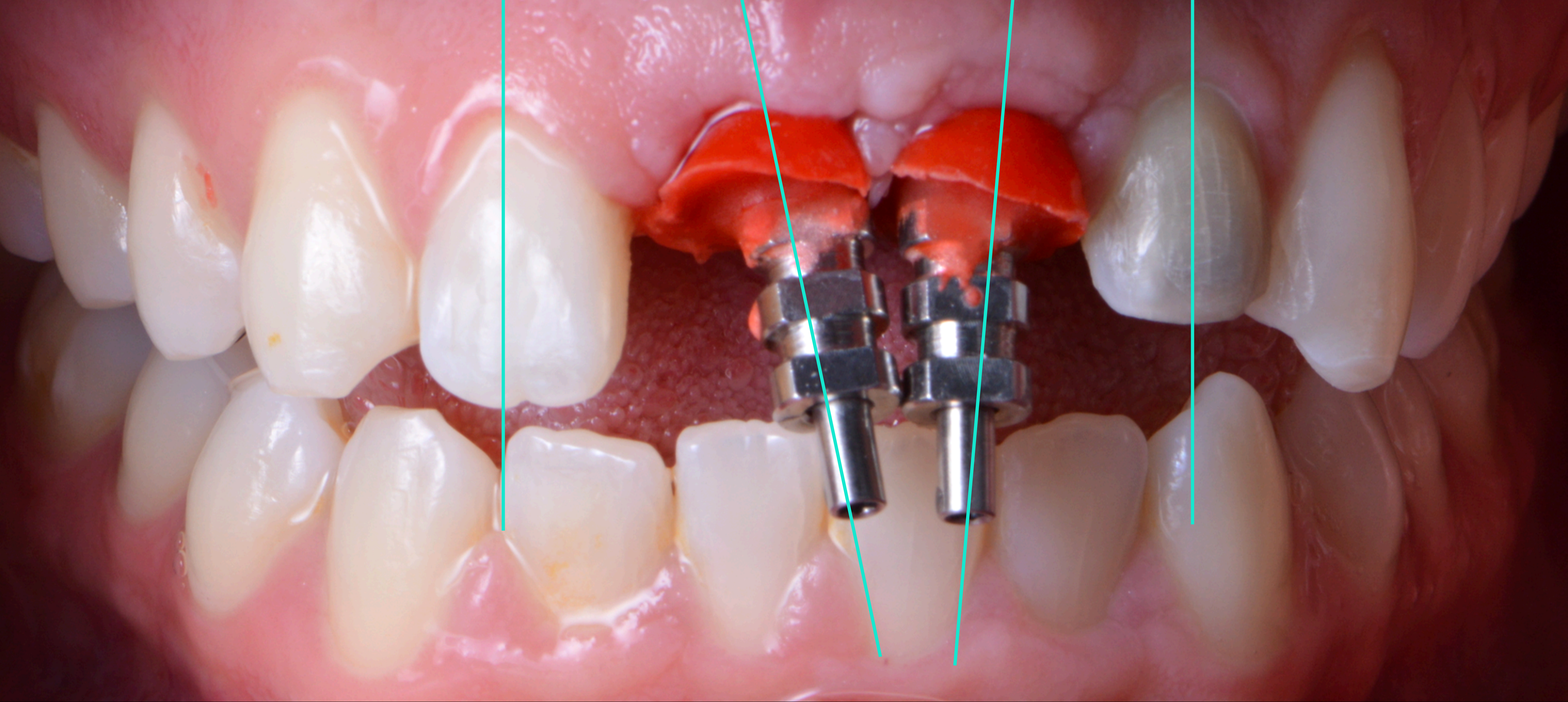

Aditamentos Protésicos




Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares


Por su relación axial con el cuerpo del implante

Aditamentos Protésicos

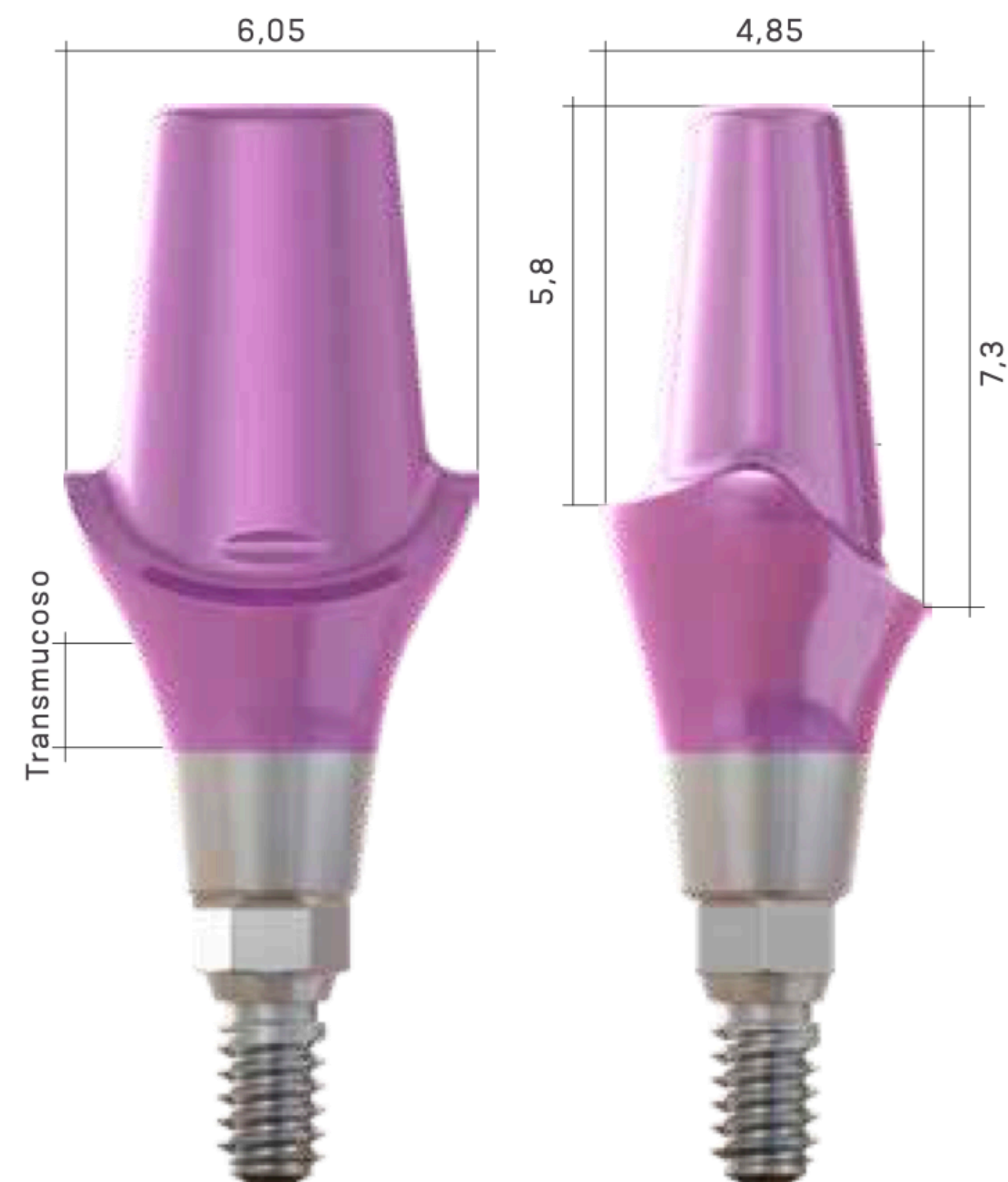

4 mm área cementada

Ø 4.5 / 17°

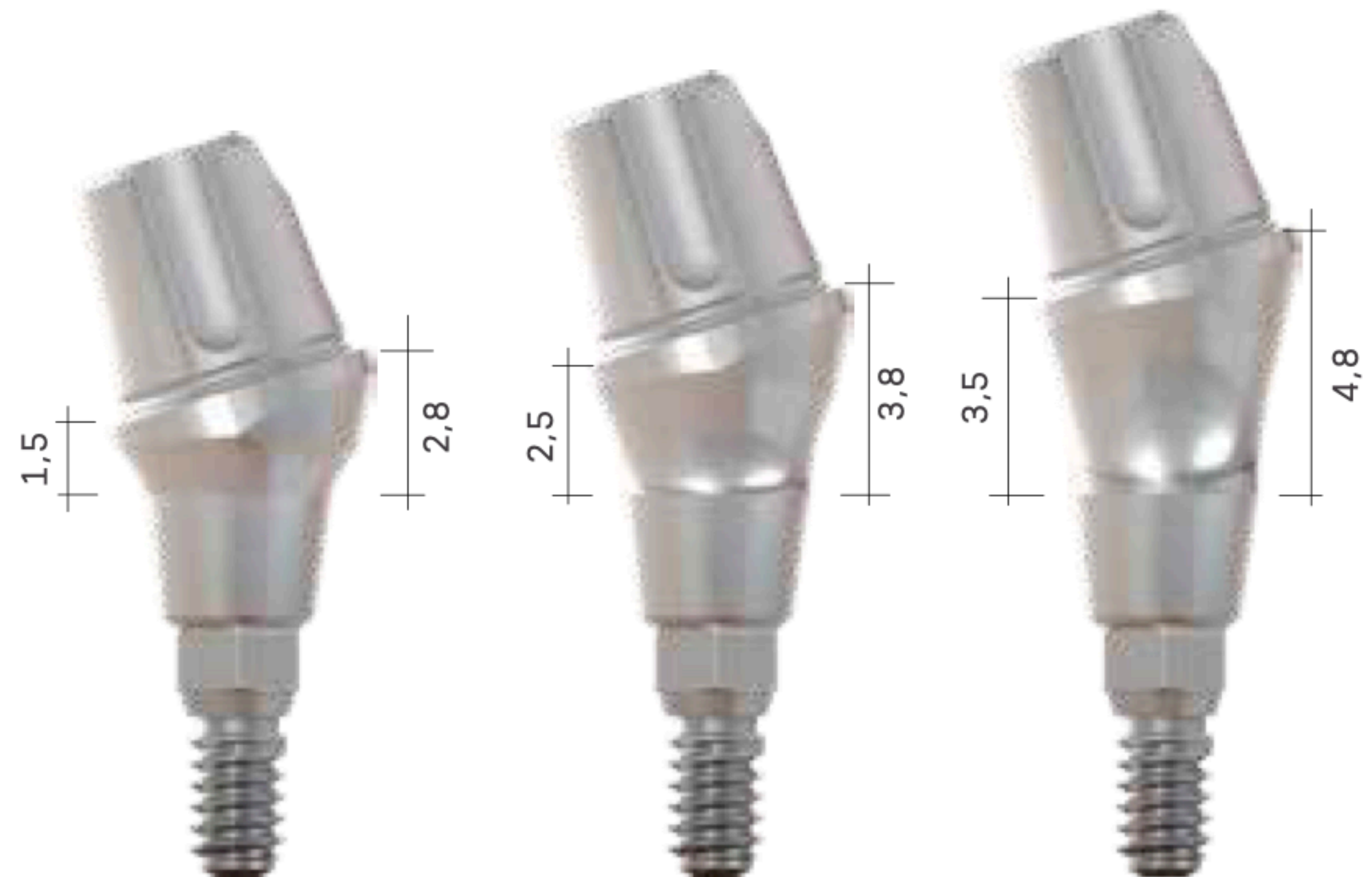

114.548

114.549

114.550

Clasificación de los pilares

Por su relación axial con el cuerpo del implante

Aditamentos Protésicos

4 mm área cementada

Ø 3.3 / 30°



114.554

114.555

114.556

4 mm área cementada

Ø 4.5 / 30°



114.560

114.561

114.562

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su material de confección

Metálicos



Titanio: es una de las aleaciones más tradicionales en la implantología debido a sus excelentes propiedades biológicas y mecánicas. muchos estudios clínicos han demostrado una excelente supervivencia en las restauraciones soportadas por pilares de titanio.



Aditamentos Protésicos

Base de Titanio GM

Con tornillo extraíble




Clasificación de los pilares Por su material de confección

Metálicos




Titanio

Cilindro en Titanio del Micro Pilar Neo²

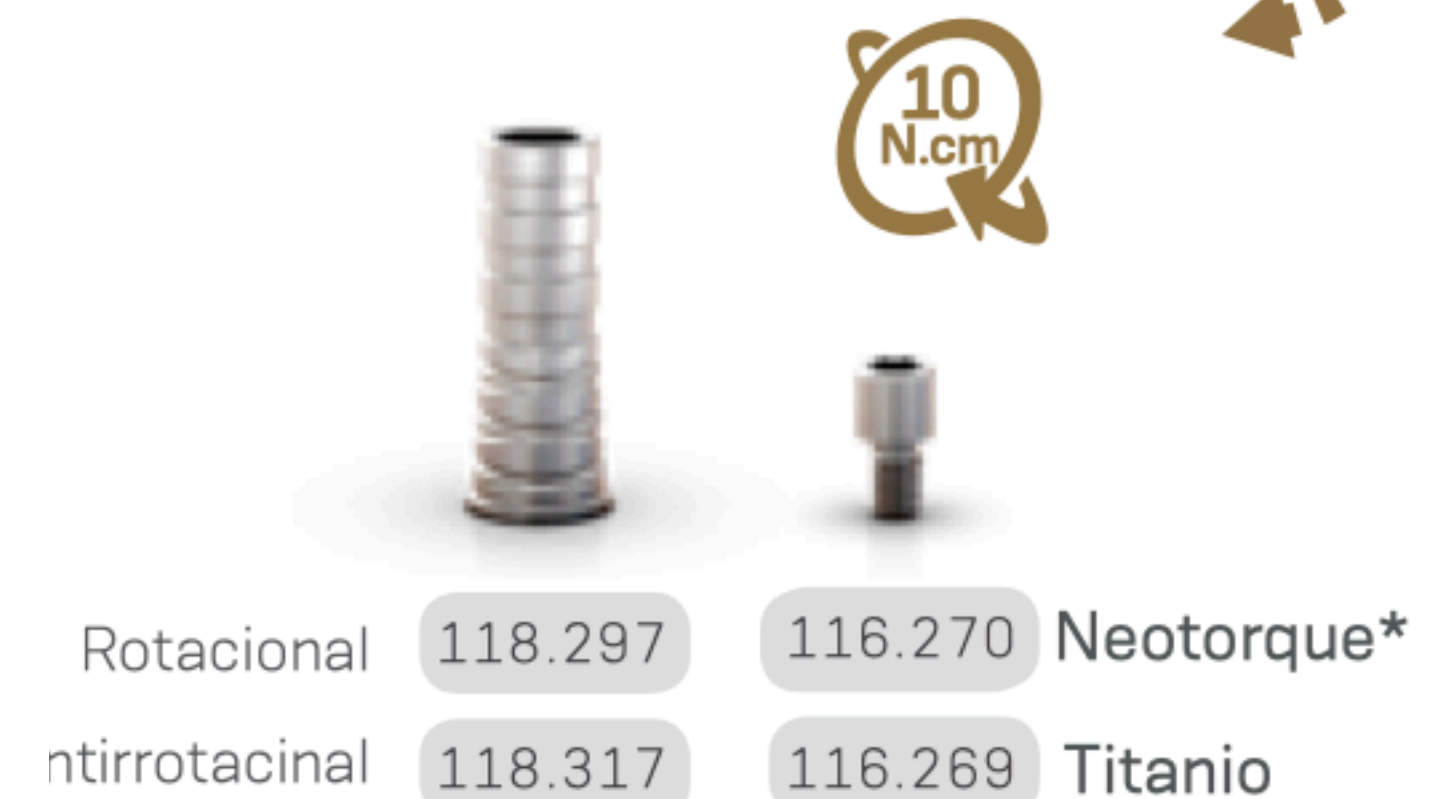

Aditamentos Protésicos

Bloques de Titanio GM

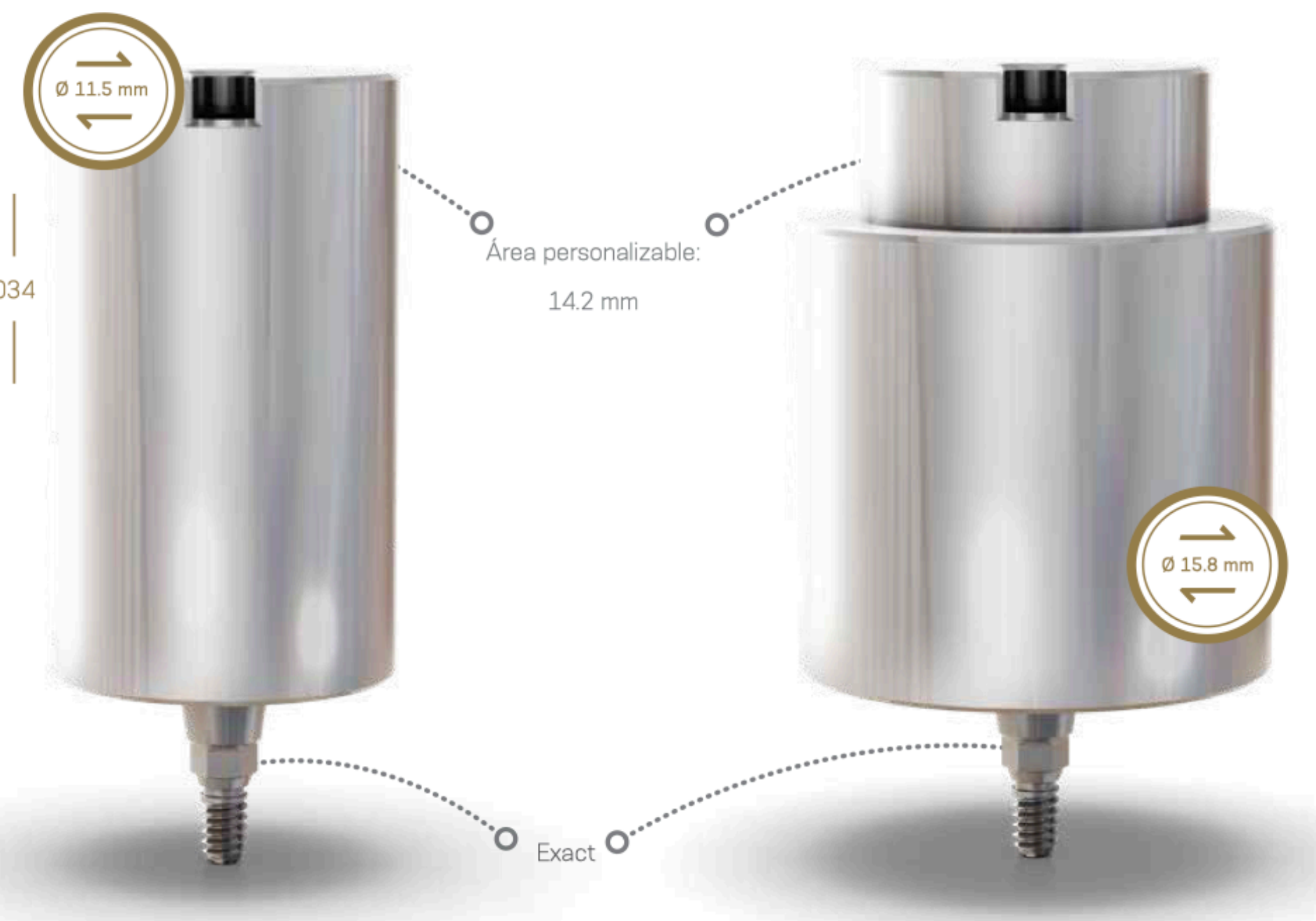


Clasificación de los pilares Por su material de confección

Metálicos



Titanio

Flujo semidigital

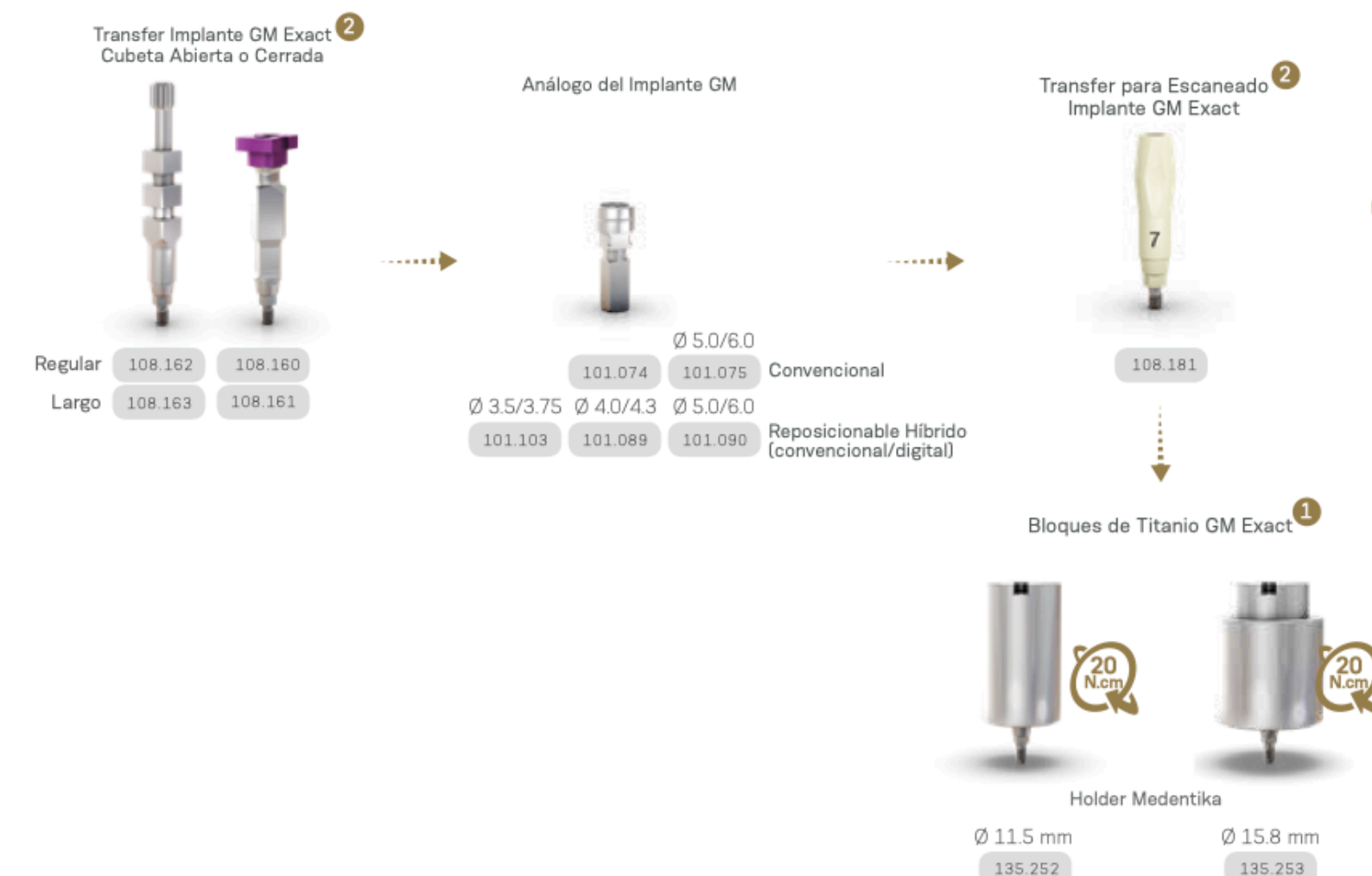

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su material de confección

Metálicos



Cromo-Cobalto: Sus ventajas son su menor peso, gran resistencia son más económicos y los inconvenientes su técnica compleja, la alta temperatura para su colado, su difícil pulido.

Nobel CrCo



Cilindro CoCr del
Micro Pilar Neo

2



Rotacional

118.296

116.270

Neotorque*

Anti-rotacional

118.316

116.269

Titanio

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su material de confección

Metálicos



Cromo-Cobalto: Sus ventajas son su menor peso, gran resistencia son más económicos y los inconvenientes su técnica compleja, la alta temperatura para su colado, su difícil pulido.





Por su material de confección


Metálicos



Oro: Metal altamente maleable, gran capacidad de bruñido, resistencia a la corrosión, altamente biocompatible.

Desventaja: costo

Aditamentos Protésicos

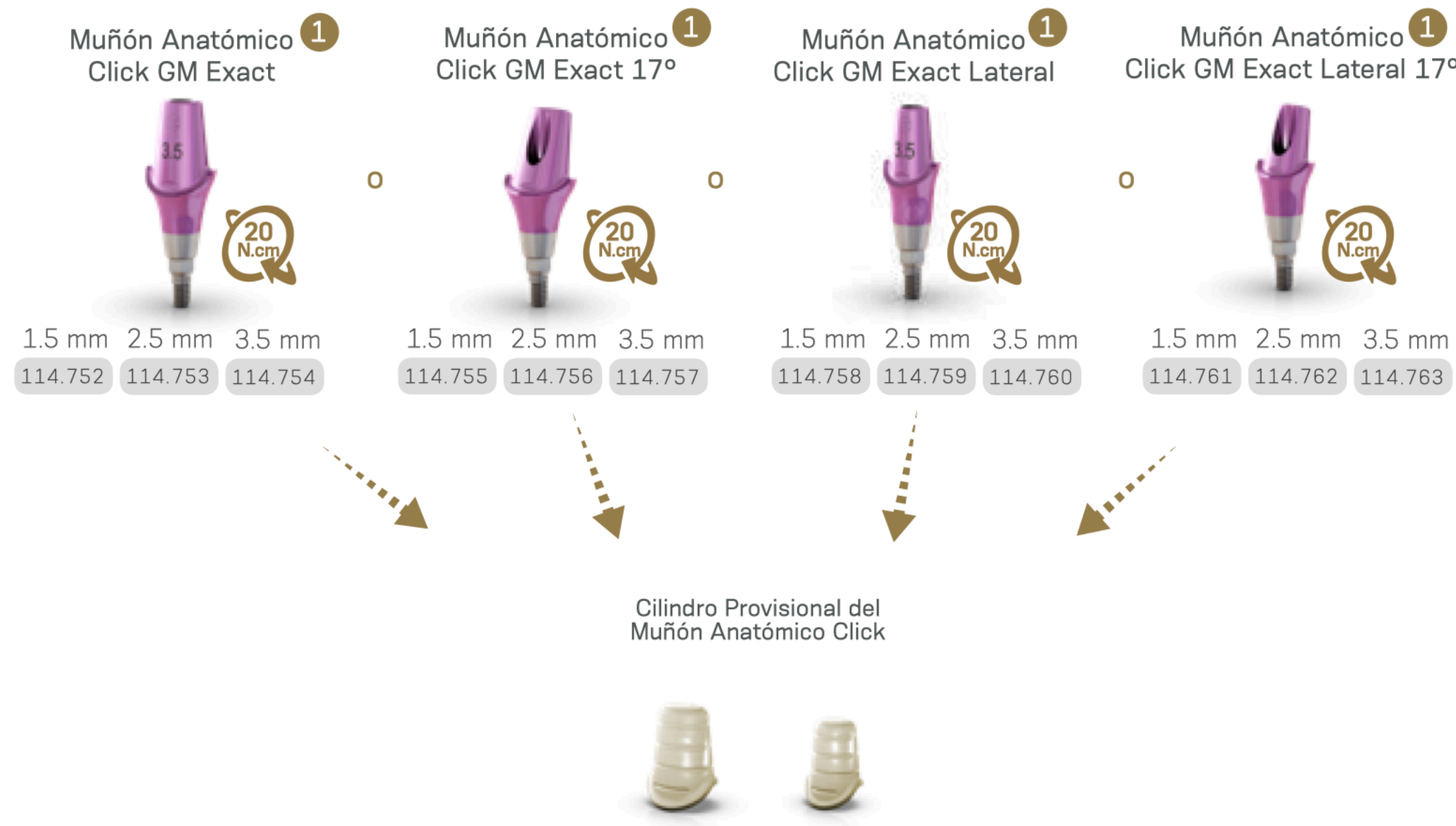

Por su material de confección

Plásticos



Provisional: Elaborados de un polímero plástico de color semejante al diente, proveen de soporte a la restauración temporal. Su tiempo de permanencia en boca es hasta 180 días.

Aditamentos Protésicos



Direct temporary
plastic cylinder

H1

NARROW

STANDARD

WIDE

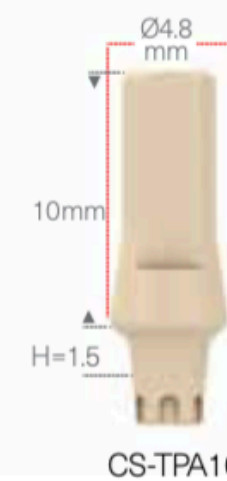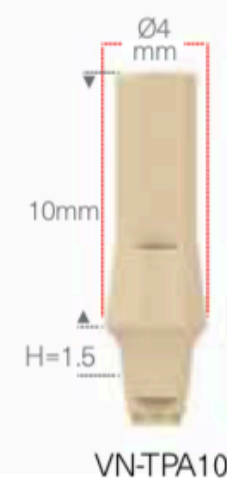

Por su material de confección


Plásticos



Provisional: Elaborados de un polímero plástico de color semejante al diente, proveen de soporte a la restauración temporal. Su tiempo de permanencia en boca es hasta 180 días.

Aditamentos Protésicos

Direct free-rotation gold plastic
cylinder, free-rotation

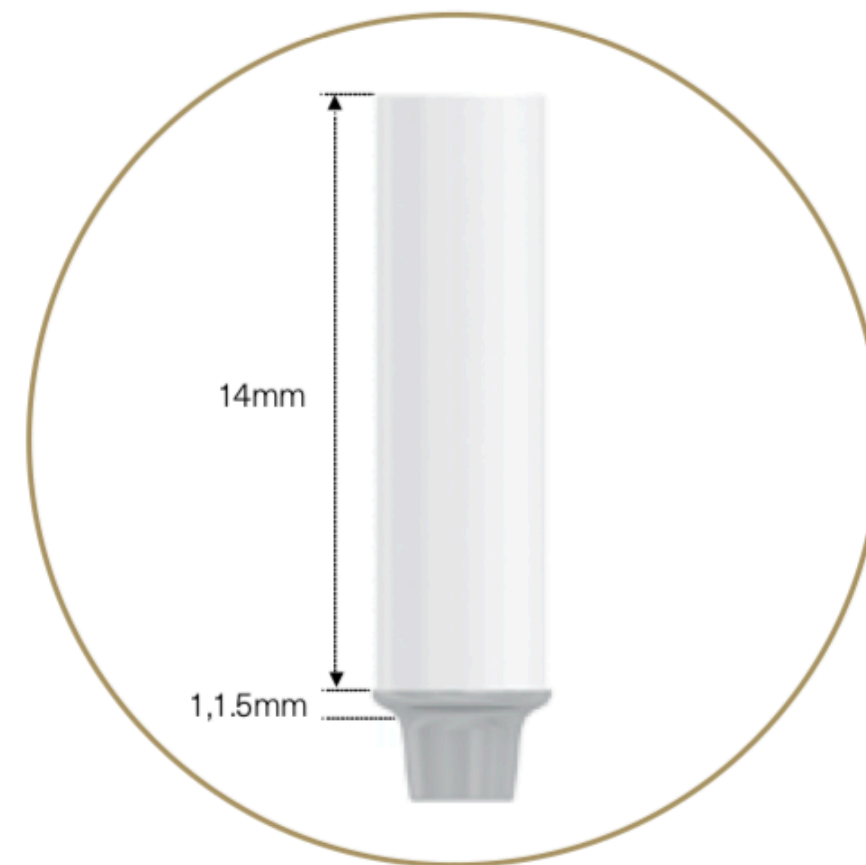


NP CN-GP010

SP CS-GP010

WP CW-GP020

Direct anti-rotation gold plastic
cylinder, anti-rotation

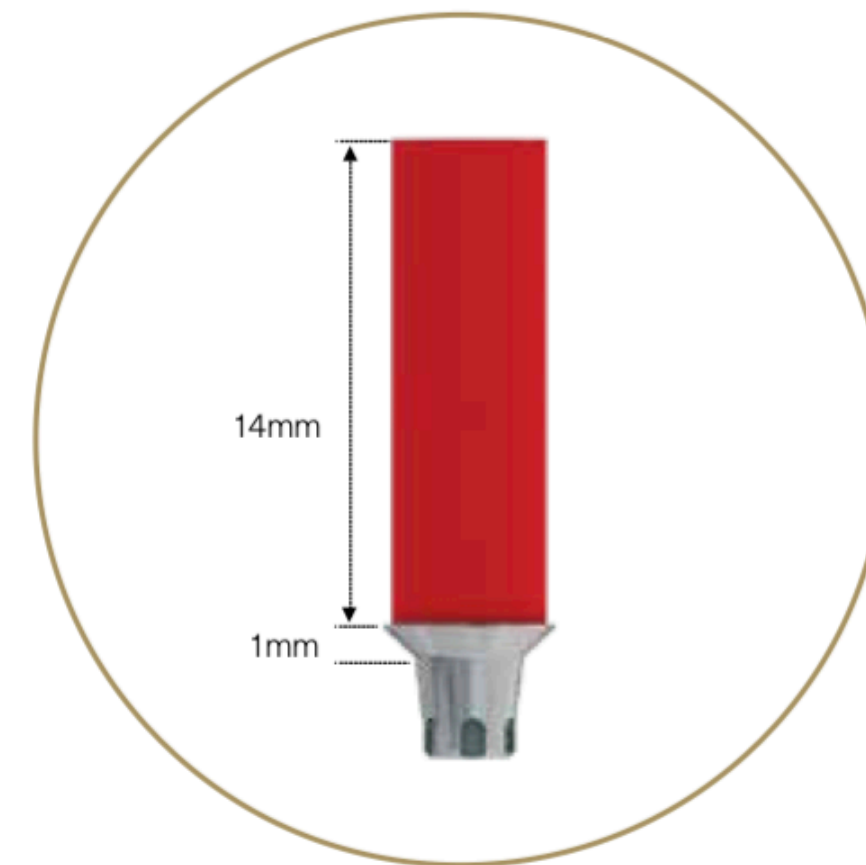

NP CN-GPC10
VN-GPC10

SP CS-GPC10

WP CW-GPC10


Por su material de confección

Plásticos



Calcinables: Elaborados de un polímero plástico
Modificable para su posterior fundición.

Aditamentos Protésicos

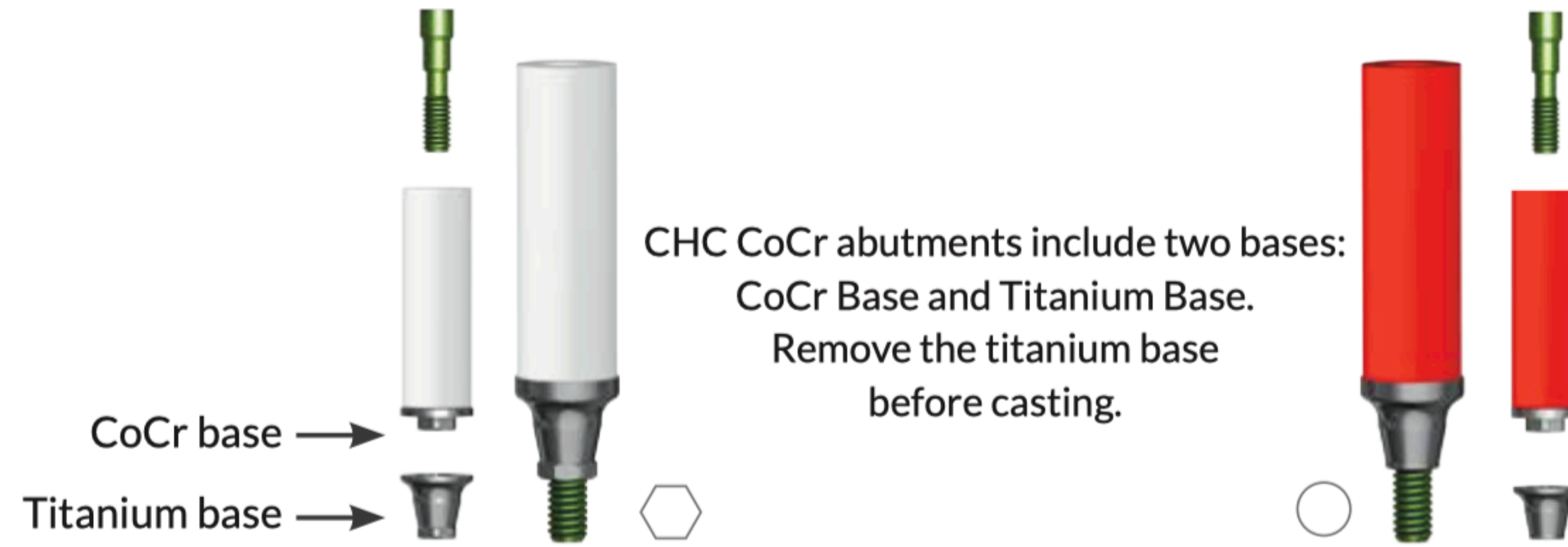

Por su material de confección

Plásticos



Calcinables: Elaborados de un polímero plástico modificable para su posterior fundición.


Aditamentos Protésicos

Muñón Pro Peek GM

Peek biocompatible de fácil personalización.



Prótesis
Temporal

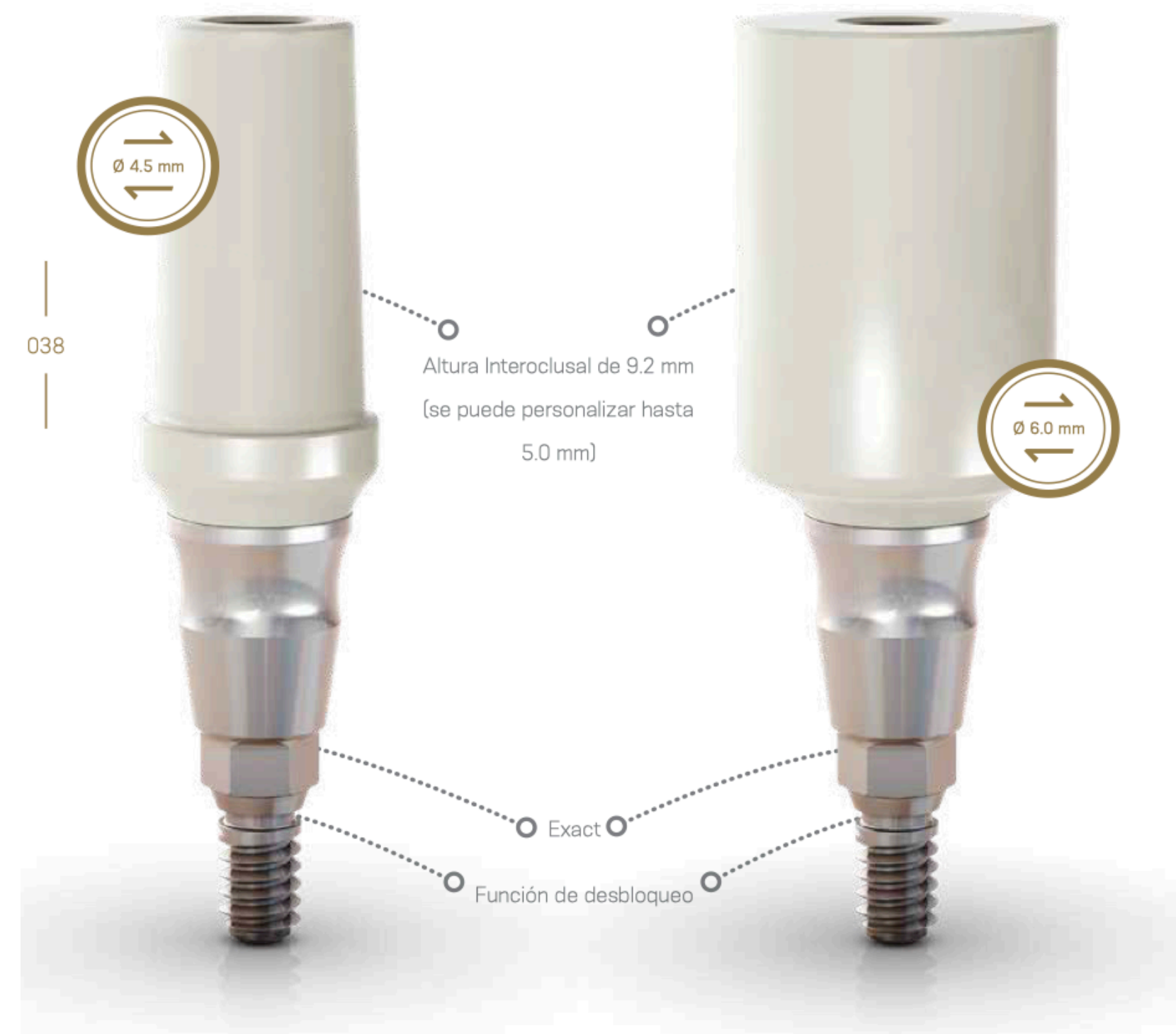

Considerar 1.5 - 2.0 mm de material restaurador

Por su material de confección

Bioactivos



Peek: (poliéter-éter-cetona) se está introduciendo en rehabilitaciones dentarias desde hace unos 12 años, y permite a aquellas personas que pueden tener alergias a metales, disfruten de un tratamiento innovador y eficaz, ya que este plástico es biocompatible con el organismo humano.

Aditamentos Protésicos




Por su material de confección

Cerámicos



Estos pilares fueron creados a partir de los inconvenientes que podrían ocasionar los pilares metálicos como: la visualización de la terminación del pilar a nivel gingival, el cambio del color de la encía por la translucidez del metal en los biotipos periodontales finos o la visualización del pilar por la retracción gingival.

Aditamentos Protésicos

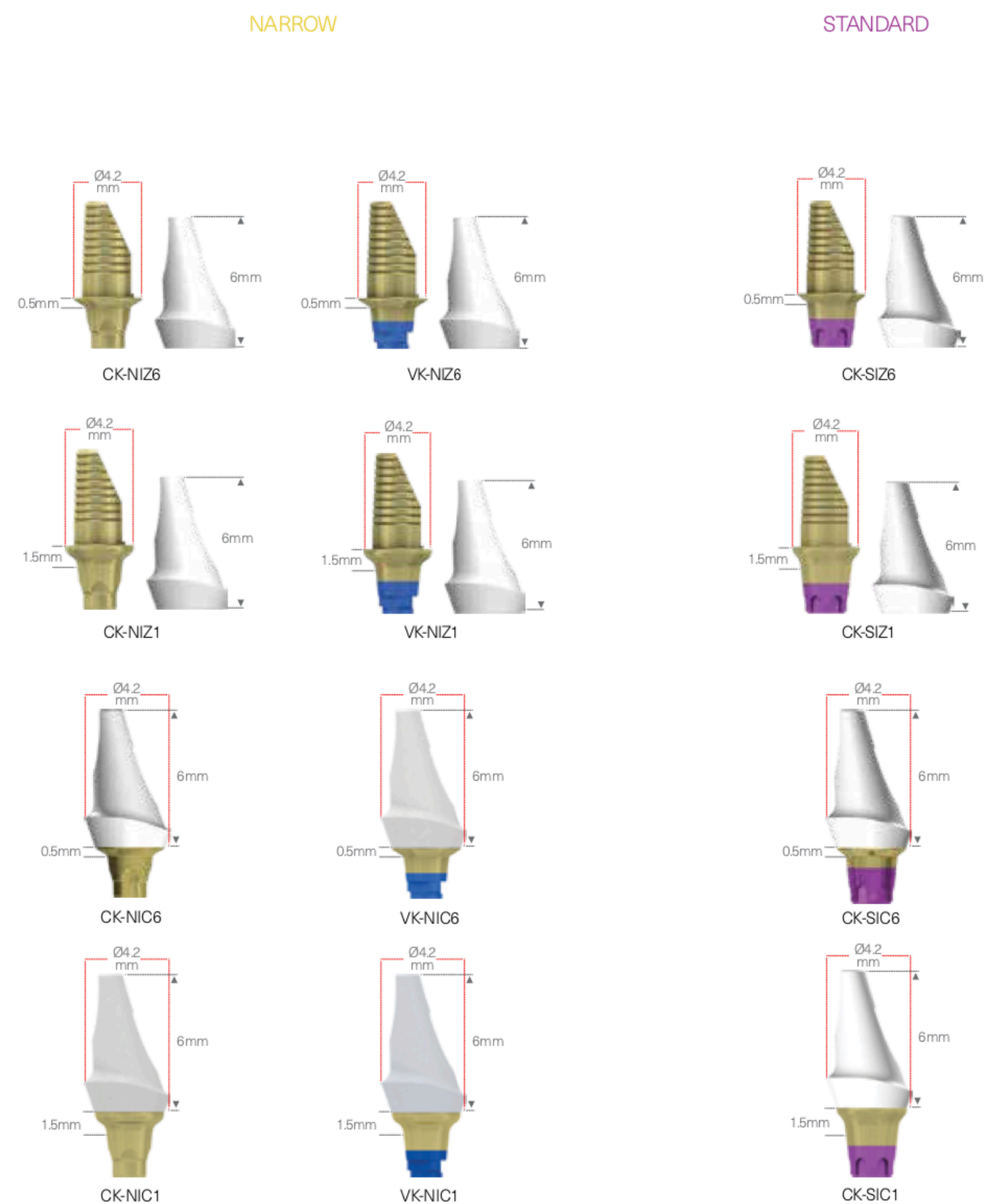Zirconia incisor,
Non-Cemented

Por su material de confección

Cerámicos

Zirconia: Muy biocompatible, mayor estética.
Desventaja: costo

Aditamentos Protésicos

Aditamentos Protésicos



Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados



No modificables

Modificables

Aditamentos Protésicos



Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados

No modificables

Modificables

Construidos en los mismos troncos de las casas comerciales; razón por la que los implantes poseen entre ellos un alto ajuste y adaptación marginal.

Aditamentos Protésicos



Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados

No modificables

Modificables

Construidos en los mismos troncos de las casas comerciales; razón por la que los implantes poseen entre ellos un alto ajuste y adaptación marginal.

Posibilidad de modificar forma y tamaño del aditamento.

Aditamentos Protésicos



Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados



Los pilares macizos pueden utilizarse tanto en la zona anterior como en la posterior de la boca para realizar restauraciones con puentes y coronas cementados.
La profundidad de inserción del implante debe permitir un fácil acceso para eliminar el exceso de cemento.

Aditamentos Protésicos

Características y ventajas

Fiable

- Unión de cono Morse para asegurar un correcto ajuste por fricción
- Alta resistencia gracias a la sólida estructura en una pieza
- Componentes para prostodoncia de alta calidad avalados por décadas de excelentes resultados

Simple

- Componentes prefabricados para impresión a fin de transferir de forma precisa la situación oral del paciente
- Componentes con código de colores a fin de facilitar su identificación
- Fácil fijación de la supraestructura

Versátil

- Restauraciones para implantes NNC*, RN y WN
- Los pilares pueden modificarse conforme a las necesidades individuales de cada paciente
- Restauraciones con coronas y puentes
- Varias restauraciones provisionales disponibles

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados



Straumann® Solid Abutment Prosthetic System

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados

El procedimiento de toma de impresión en la consulta del odontólogo y la elaboración de la supraestructura en el laboratorio dental dependen de si se ha modificado o no el pilar.

Pueden utilizarse las siguientes técnicas:


Opción A = pilares no modificados

Opción B = pilares modificados

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares prefabricados

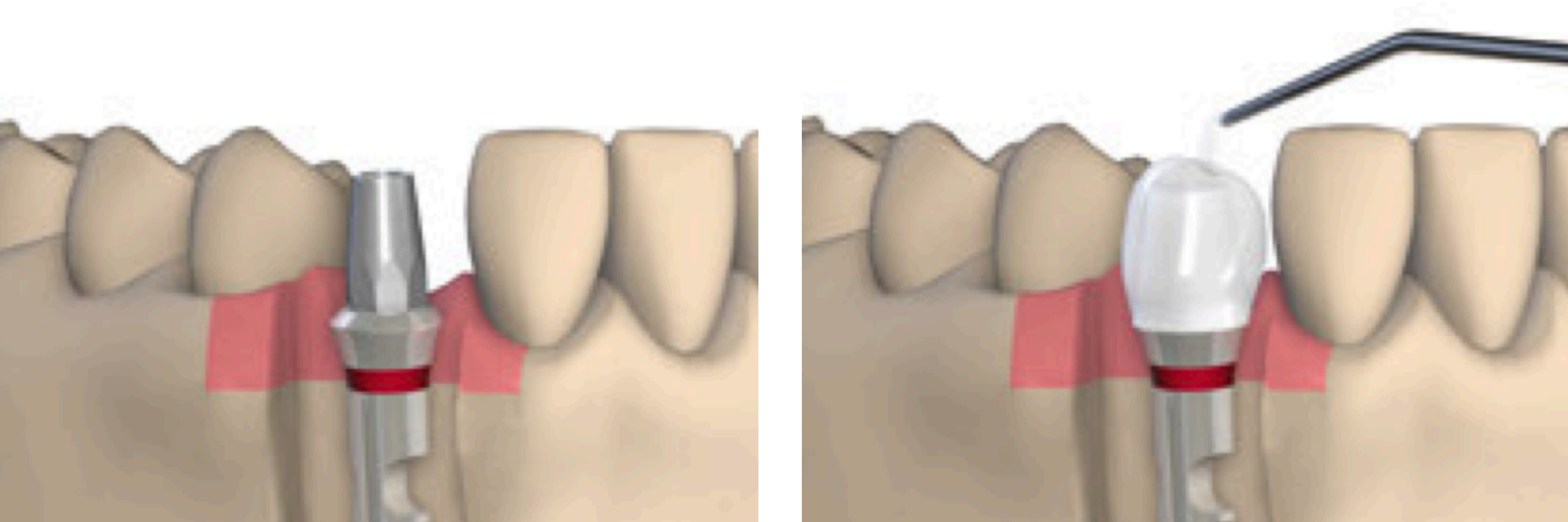

Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares confeccionados en el laboratorio



Son aquellos en donde el técnico de laboratorio mediante un cilindro de plástico que será fundido puede crear un pilar. Pueden ser colados (todo el cilindro es de plástico calcinable) o sobrecolados (el margen del cilindro es de una aleación de metal)..



Aditamentos Protésicos

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares confeccionados en el laboratorio




Aditamentos Protésicos



Clasificación de los pilares
Por su tipo de elaboración

Pilares confeccionados en el laboratorio


Aditamentos Protésicos

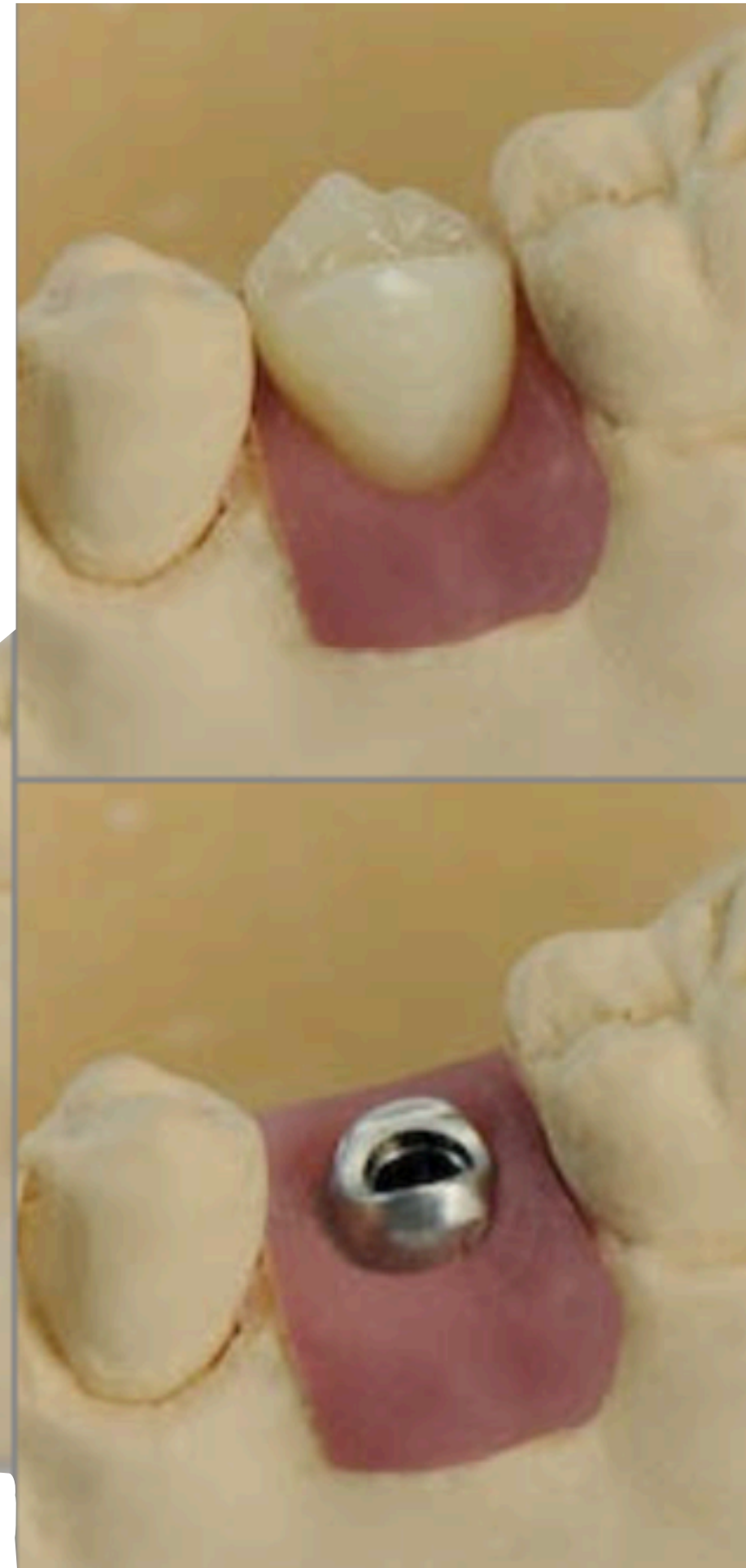

Clasificación de los pilares
Por su tipo de elaboración

Pilares confeccionados en el laboratorio

Aditamentos Protésicos

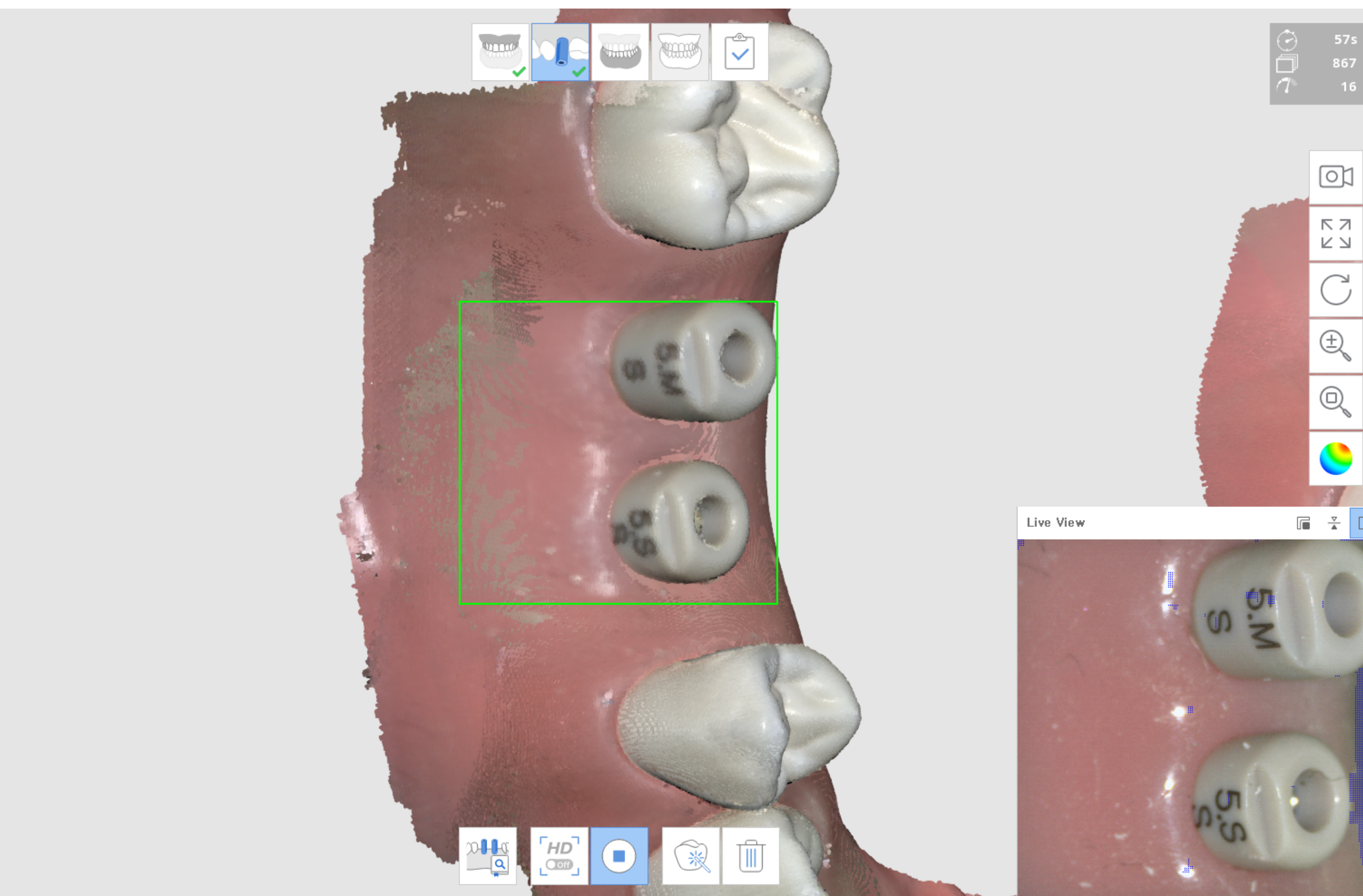

Clasificación de los pilares Por su tipo de elaboración

Pilares maquinados



Los pilares personalizados fabricados con la
Tecnología CAD-CAM en titanio o zirconia.



Flujo Digital



Flujo Semidigital



The logo for AlphaBio TEC features a stylized 'a' on the left, composed of three overlapping, curved bands in red, orange, and green. To the right of this symbol, the word 'AlphaBio' is written in a large, grey, three-dimensional sans-serif font. The letters have a slight shadow, giving them a 3D appearance. To the right of 'AlphaBio', the letters 'TEC' are written in a smaller, grey, sans-serif font.


AlphaBio_{TEC}

Aditamentos Protésicos

Los implantes óseos primero se restauran con la ayuda de pilares protésicos.



A nivel del aditamento

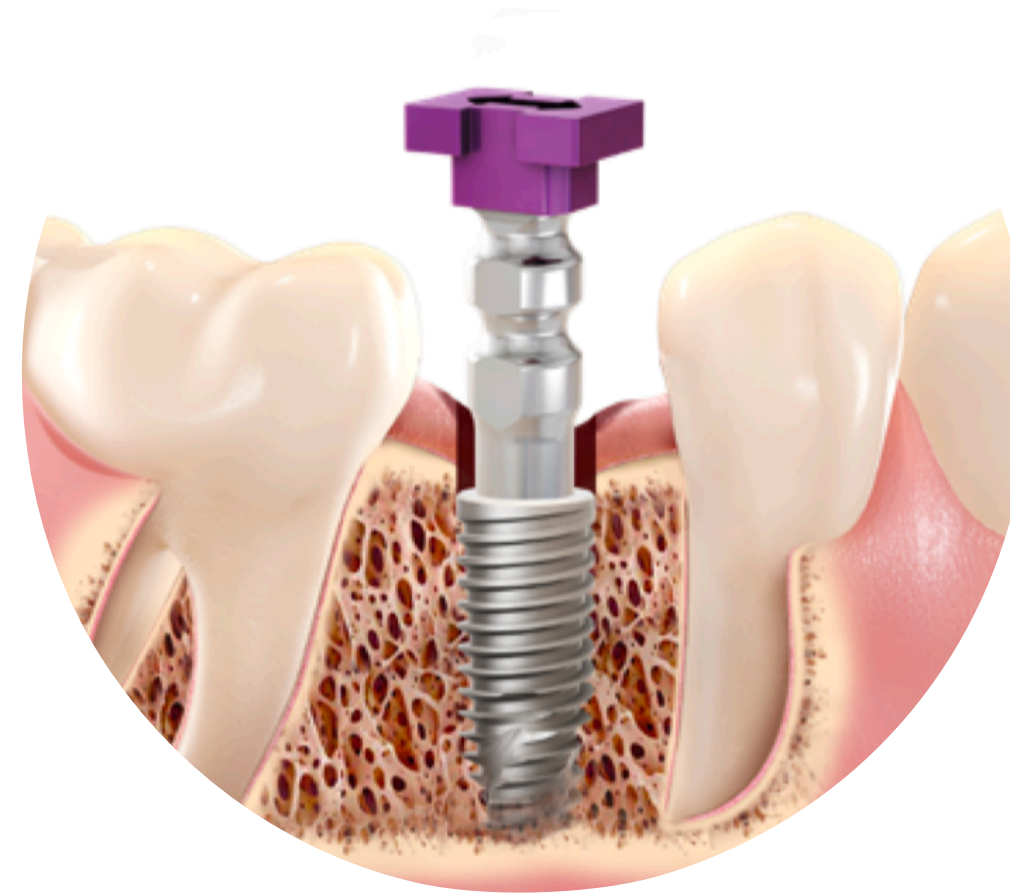

A nivel del implante

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales

A nivel del implante

En los casos en que hay poco tejido blando debido a limitaciones anatómicas, una mala colocación del implante o cualquier otra razón.

A nivel del aditamento

Cuando hay una cantidad mínima de mucosa, dado que estabilizan el tejido blando, proporcionan un sellado biológico y protegen mecánicamente el sistema.

Estas piezas se atornillan a los implantes y actúan como componente que mejora la estabilidad ósea y tiene efectos beneficiosos sobre el hueso marginal periimplantario. Los pilares protésicos soportan el tejido blando durante el procedimiento.

Aditamentos Protésicos



A nivel del aditamento

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales



A nivel del pilar

Las prótesis a nivel de pilar requieren procedimientos a nivel de pilar; es decir, impresiones, pruebas clínicas, restauraciones provisionales, etc. que deberán efectuarse siempre en los pilares.

Aditamentos Protésicos

| PILAR GM EXACT

El pilar GM Exact está fabricado de aleación de titanio de conformidad con la Norma ASTM F136 y se recomienda para prótesis unitarias atornilladas (coronas). El tornillo de fijación que venía con los cilindros de este pilar tiene un diámetro más grande que los tornillos de fijación de las prótesis convencionales (los tornillos de fijación del pilar GM Exact tiene 2,0 mm frente a 1,4 mm de los tornillos convencionales). Esto mejora el rendimiento mecánico.




Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales

A nivel del pilar

Aditamentos Protésicos


Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del pilar

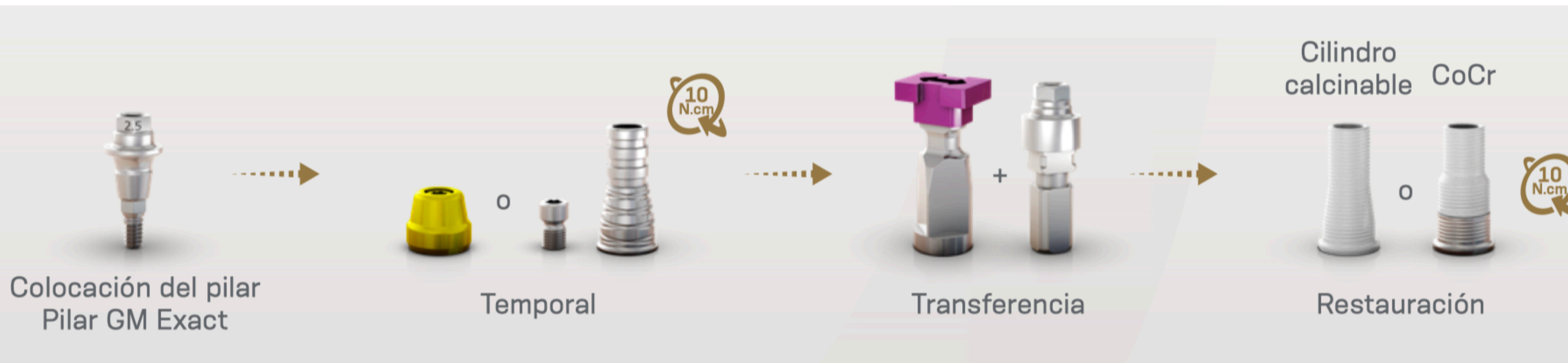

Aditamentos Protésicos

MINI PILAR CÓNICO GM

El mini pilar cónico GM está indicado para prótesis atornilladas múltiples. El mini pilar cónico GM está disponible en modelo recto o en tres ángulos diferentes: 17°, 30° y 45°. Los pilares angulados están disponible también en diferentes alturas gingivales, como se muestra a continuación:

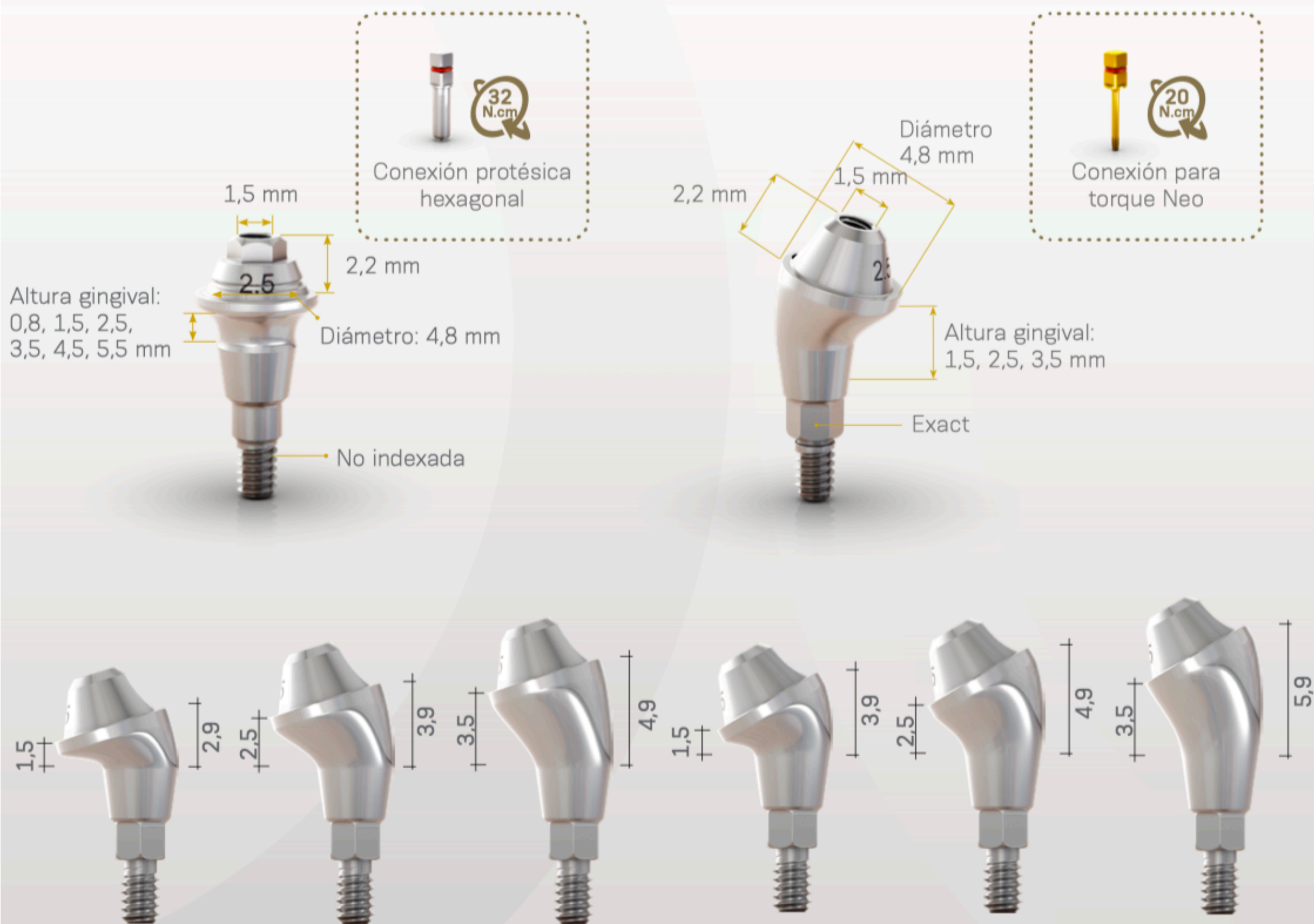

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del pilar

Aditamentos Protésicos

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del pilar



MULTI-UNIT ANGLED ABUTMENTS



17°			
CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CODE	AU 17-1.5-CS	AU 17-2.5-CS	AU 17-3.5-CS
REF. NO.	3862	3863	3864
INSTRUCTIONS	Use 1.25 mm driver with 30 Ncm torque.		



30°			
CUFF HEIGHT	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CODE	AU 30-1.5-CS	AU 30-2.5-CS	AU 30-3.5-CS
REF. NO.	3867	3868	3869
INSTRUCTIONS	Use 1.25 mm driver with 30 Ncm torque.		

STANDARD CONNECTION

Aditamentos Protésicos

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del pilar

MULTI-UNIT STRAIGHT ABUTMENTS – FOR RESTORATION OF UP TO 30° DIVERSION BETWEEN TEETH



CUFF HEIGHT	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CODE	TCT-0.5-CS	TCT-1.5-CS	TCT-2.5-CS
REF. NO.	3870	3871	3872
INSTRUCTIONS	Use 1.5 mm driver for insertion (see page 20). Recommended closing torque: 30 Ncm*. Supra structure on top of the abutments remains the same and can be used with Alpha Universe products, except for AR products. For digital restoration process use rotational scan body 3883.		

* Not recommended for single tooth restorations.

STRAIGHT ABUTMENTS – FOR SINGLE IMPLANT RESTORATION



CUFF HEIGHT	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CODE	HBC-H0.75-CS	HBC-H1.5-CS	HBC-H2.5-CS
REF. NO.	3876	3877	3878
INSTRUCTIONS	Use 1.25 mm driver with 30 Ncm torque. Abutments are supplied with a screw and a plastic burnout sleeve.		

Aditamentos Protésicos

Nivel de trabajo Para prótesis de implantes dentales


| PILAR UNIVERSAL GM EXACT CLICK

El pilar universal GM Exact Click está pensado para el uso con prótesis unitarias cementadas. Tiene un sistema de click que ayuda en la impresión y la cementación/fabricación de las prótesis provisionales. El pilar universal GM Exact Click está disponible en diferentes dimensiones, como se indica a continuación:



El sistema en clic se reproduce en todos los análogos y cilindros acrílicos para coronas provisionales. Además, los análogos y transfers convencionales se identifican con colores de acuerdo a la altura del área cementable (violeta para 4 mm y verde para 6 mm), como se expone a continuación. Los análogos reposicionables híbridos también pueden utilizarse en este flujo de trabajo, pero para esta solución no se aplica ningún color diferente.

El pilar universal GM Exact Click está disponible en diferentes ángulos (recto, 17° y 30°) para todas las dimensiones ofrecidas. Los pilares angulados permiten diferentes alturas gingivales, como se muestra a continuación.

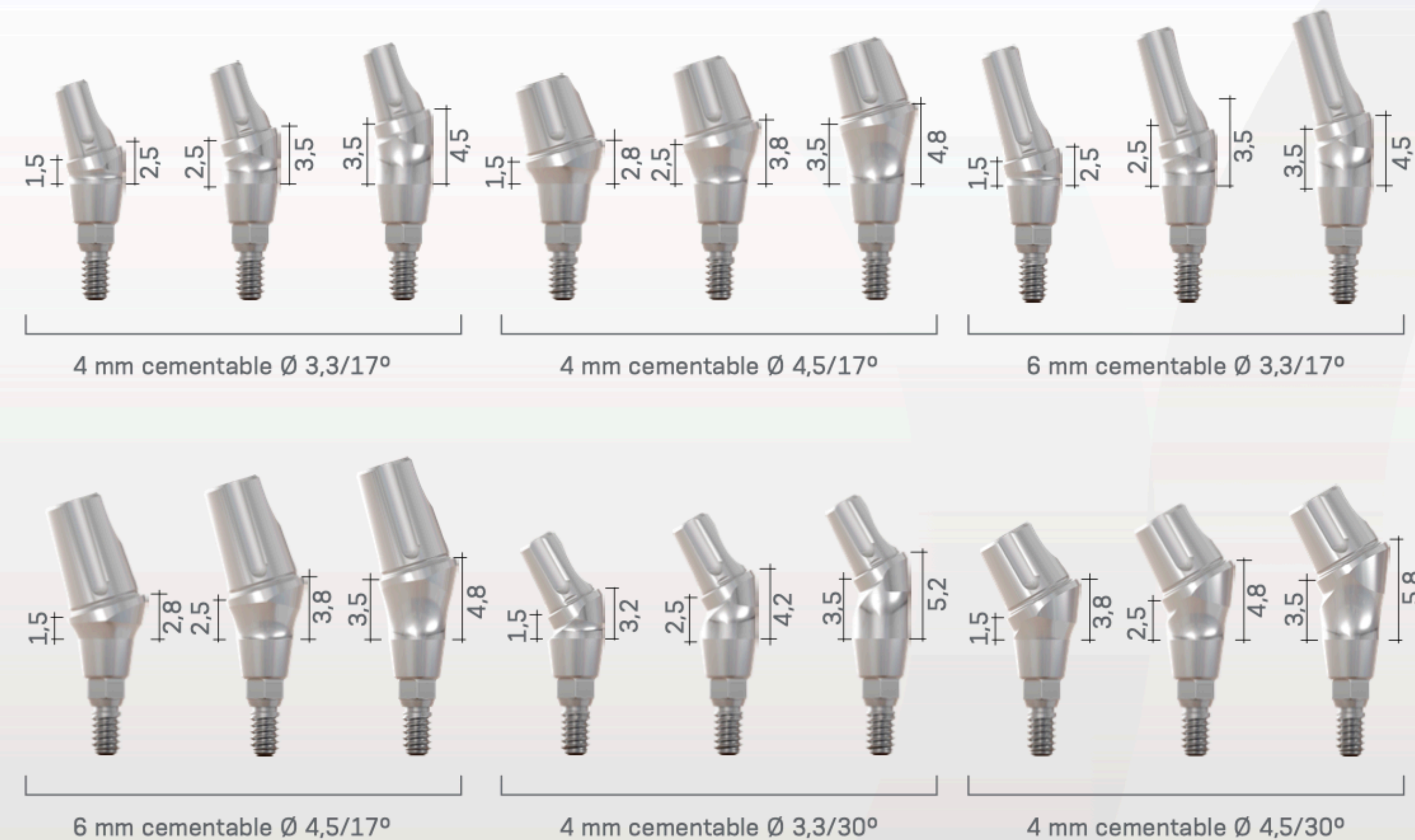

Aditamentos Protésicos

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante



Nivel de trabajo

Para prótesis de implantes dentales

A nivel del implante

Aditamentos Protésicos

| PILAR ANATÓMICO GM EXACT CLICK

El pilar anatómico GM Exact Click está indicado para prótesis cementadas unitarias. Tiene dos formas, una estándar, indicada para los incisivos centrales superiores, y otra estrecha, para los incisivos laterales superiores y los incisivos inferiores. La anodización de color rosado mejora los resultados estéticos, ya que imita el color natural de la encía. Tiene un sistema de click que ayuda en la impresión y la manipulación de las prótesis provisionales. Puede utilizarse en dos niveles de trabajo diferentes:

- Nivel de implante: tome la impresión desde la plataforma del implante con el transfer correspondiente y envíe el pilar anatómico GM Exact Click sobre el análogo de implante GM al laboratorio. Para esta secuencia, debe colocarse en la boca otro pilar anatómico GM Exact Click para el paso provisional.

- Nivel de pilar: coloque el pilar anatómico GM Exact Click sobre el pilar y realice la impresión como un diente normal. El pilar anatómico GM Exact Click puede utilizarse como paso provisional.


Cada modelo de pilar anatómico GM Exact Click está disponible en versión recta o angulada (17°) y también dispone de indexación y función de desbloqueo GM Exact.



En ambas técnicas, el cilindro provisional para el pilar anatómico GM Exact Click puede utilizarse para el paso provisional.




Siga las dimensiones de cada modelo de pilar anatómico GM Exact Click

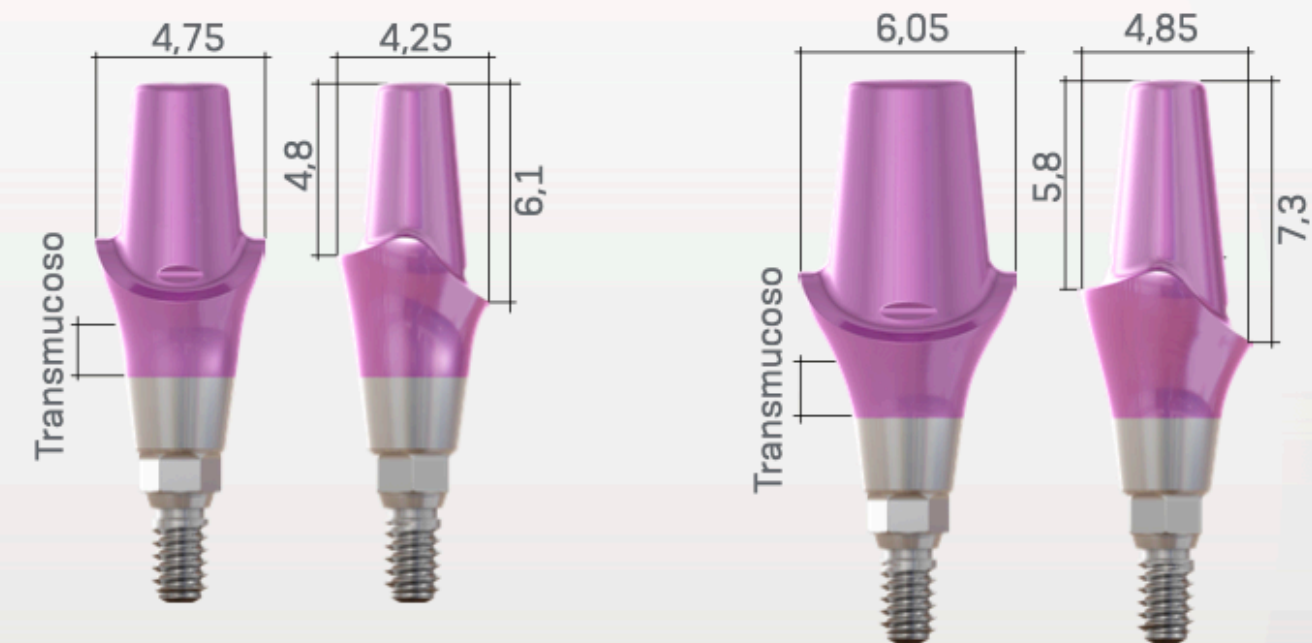

Pilar anatómico GM Exact Click estrecho

Pilar anatómico GM Exact Click

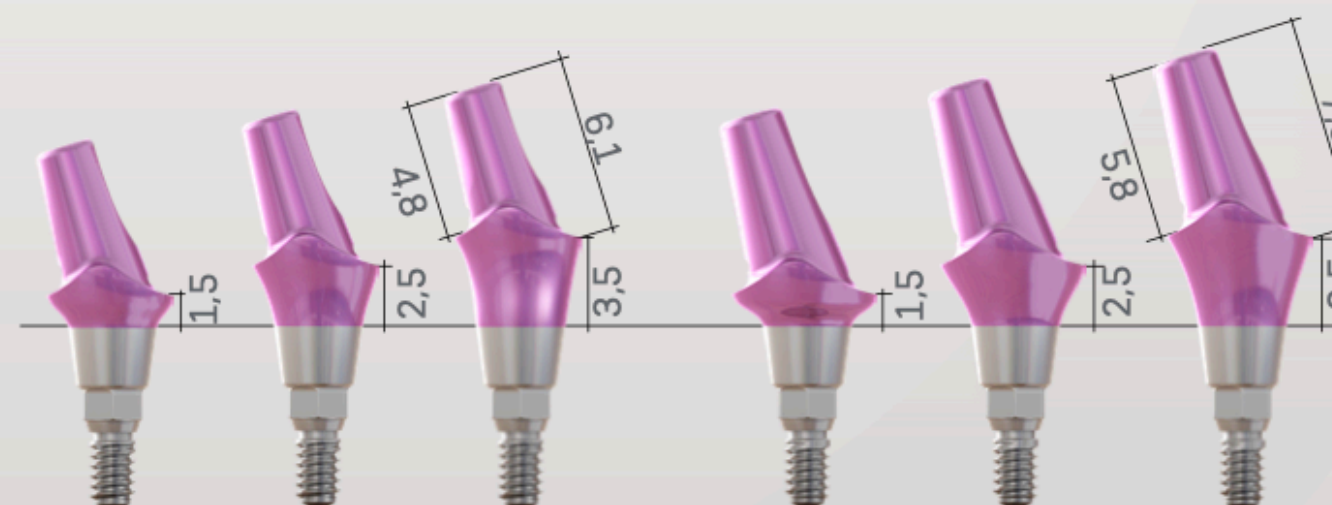


Pilar anatómico estrecho 17°

Pilar anatómico 17°

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos

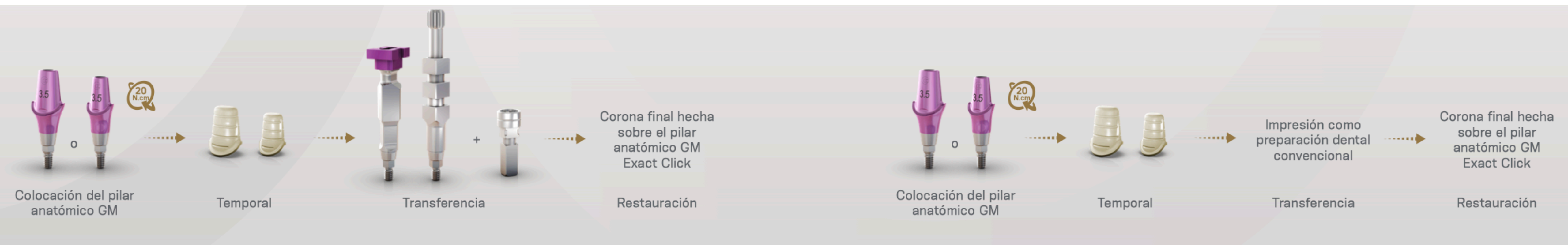

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos



Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos



Transferencia



Restauración



Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos



Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos

Inyección de cerámica
Flujo de trabajo de moldeo



Transferencia



Restauración

Nivel de trabajo
Para prótesis de implantes dentales
A nivel del implante

Aditamentos Protésicos





CECOPI



CECOPI












CECOPI





CECOPI

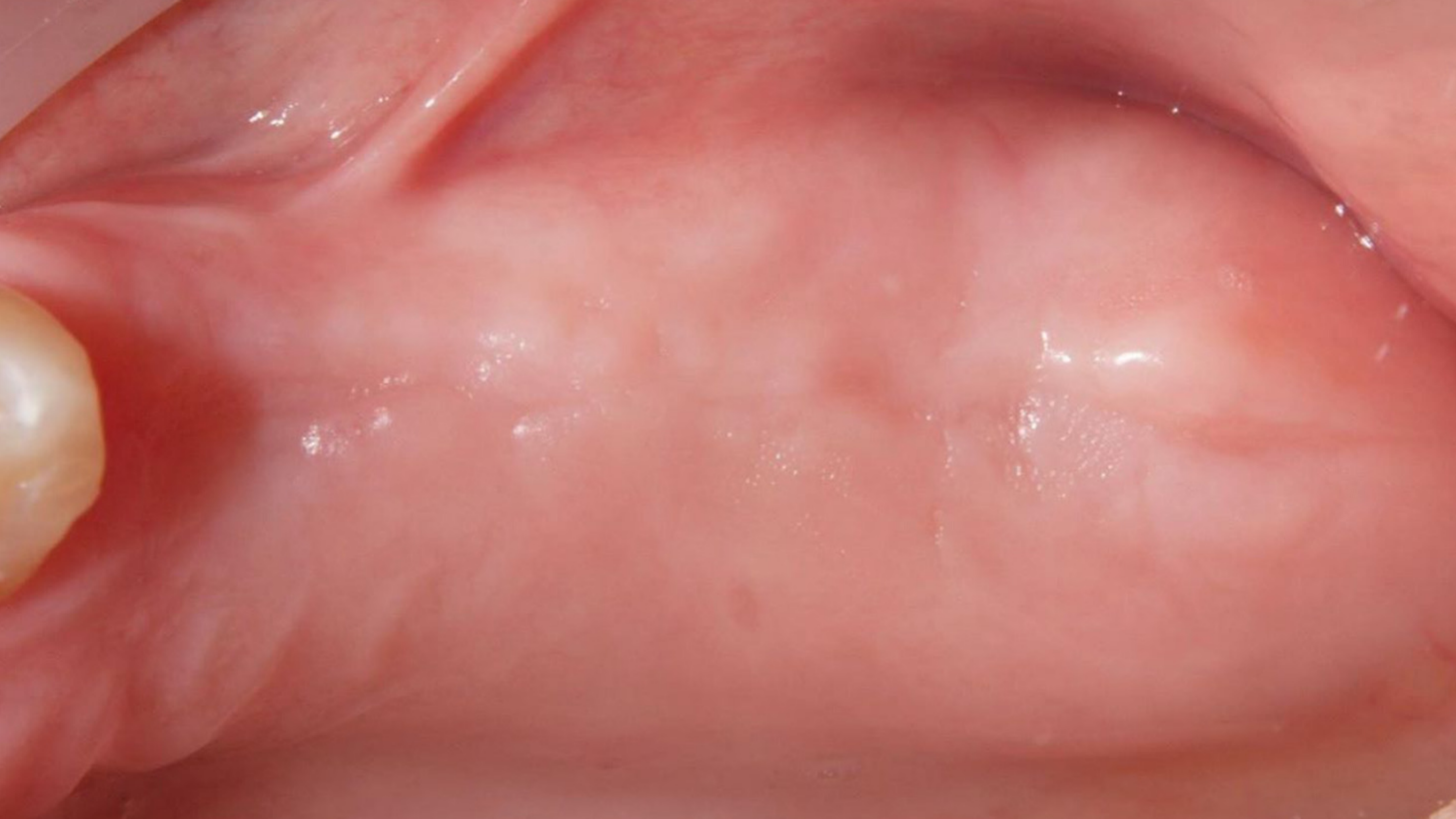

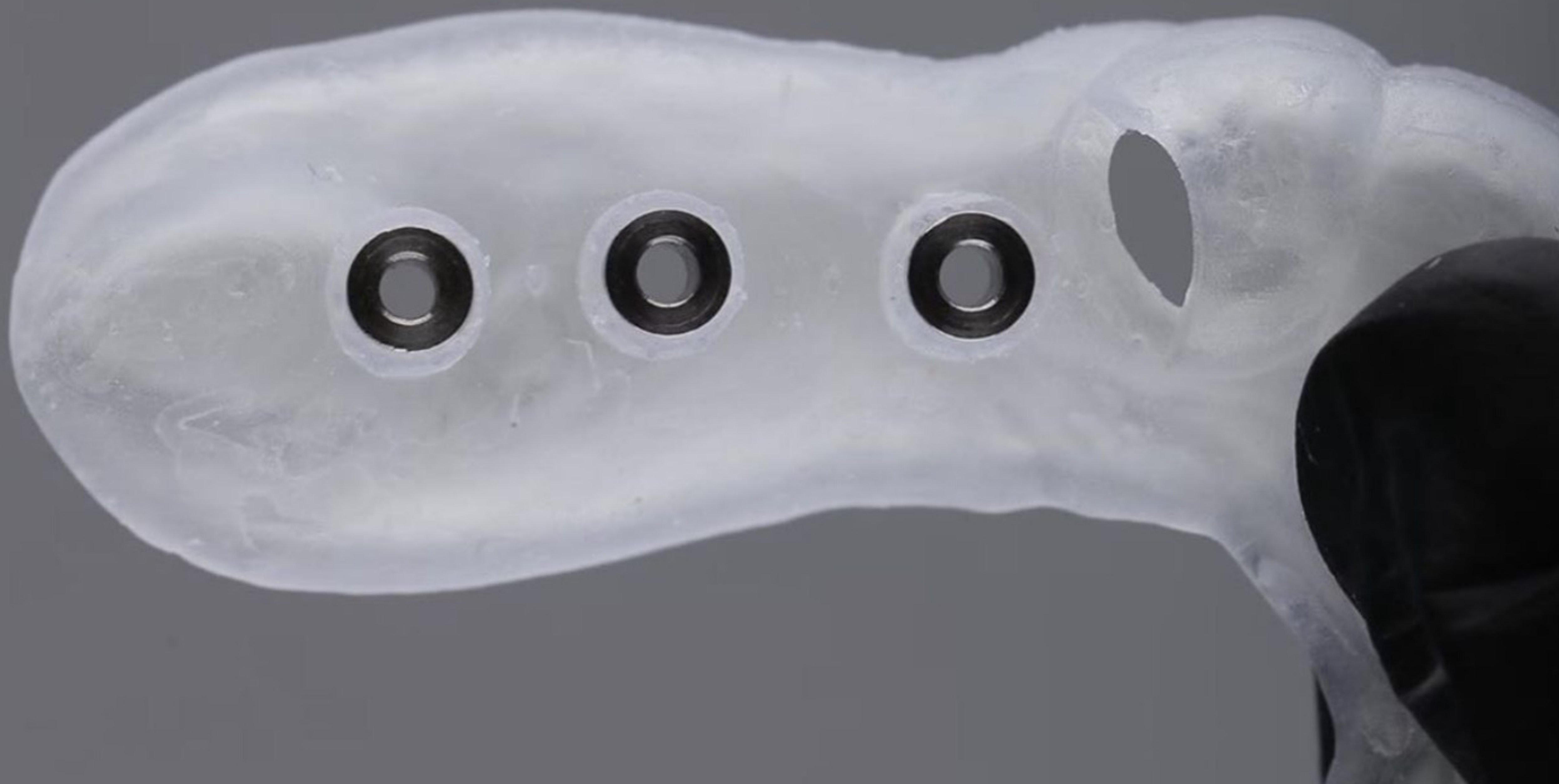

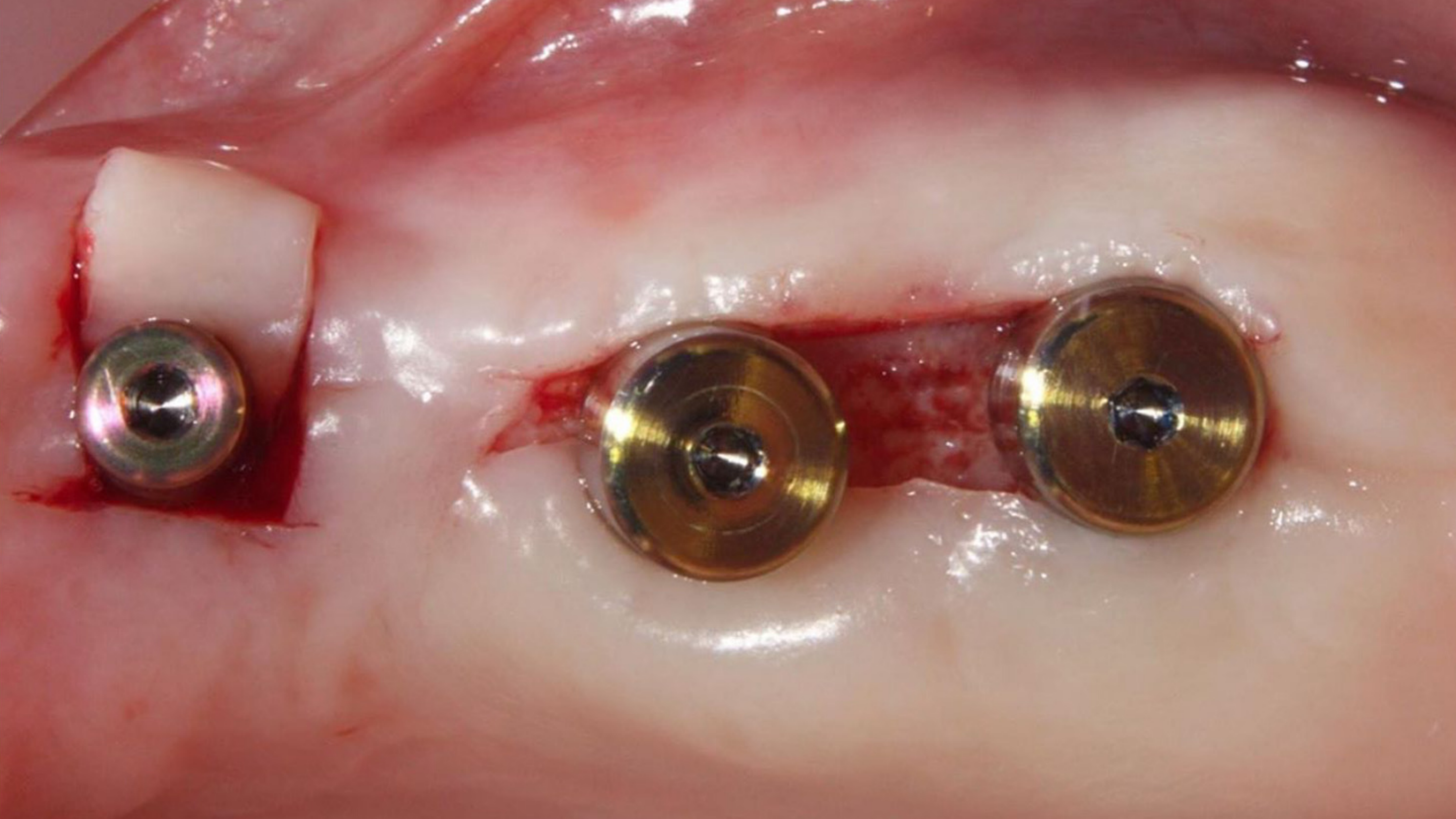

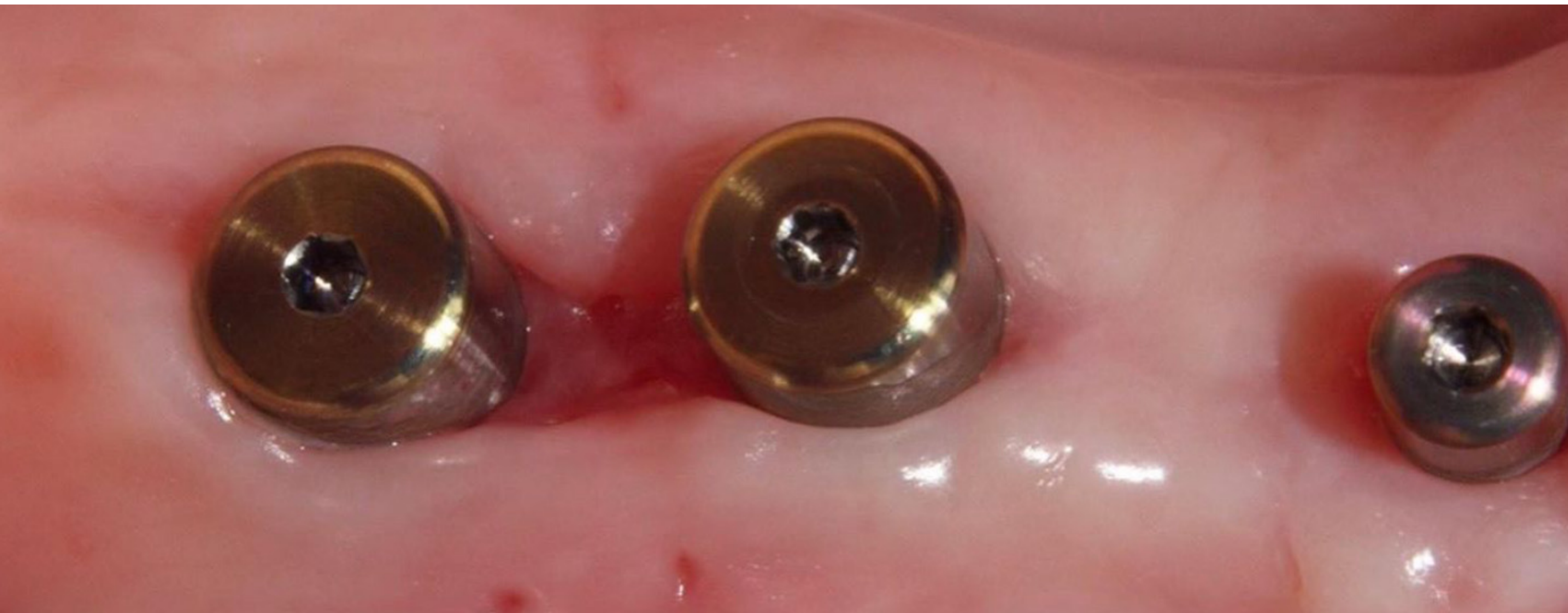

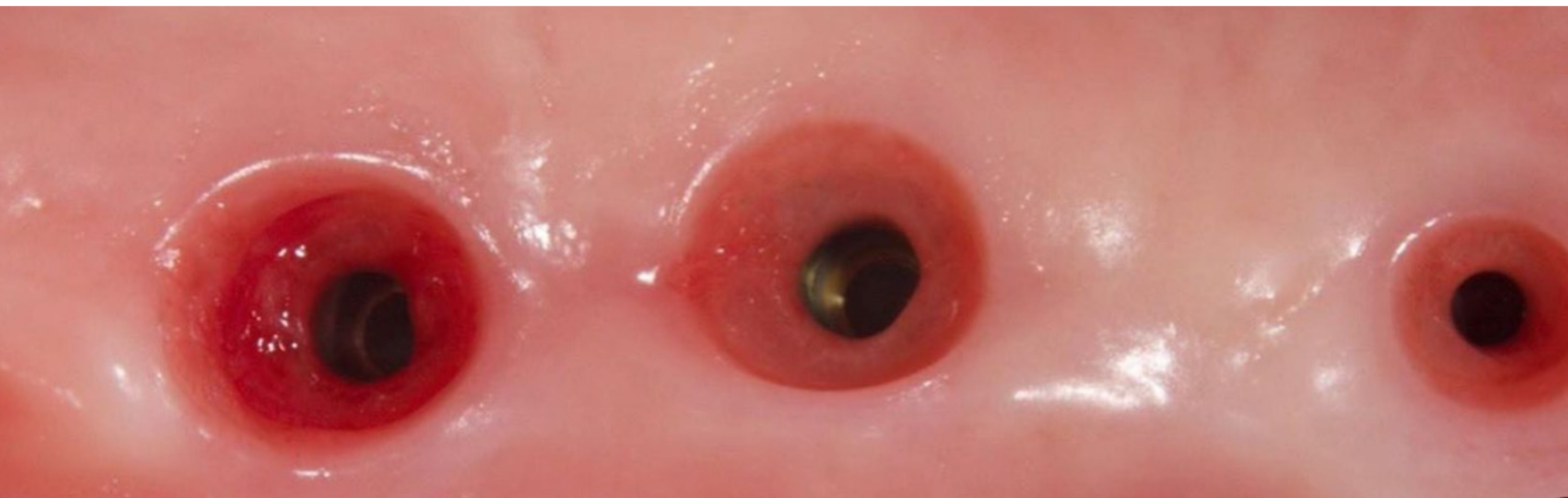














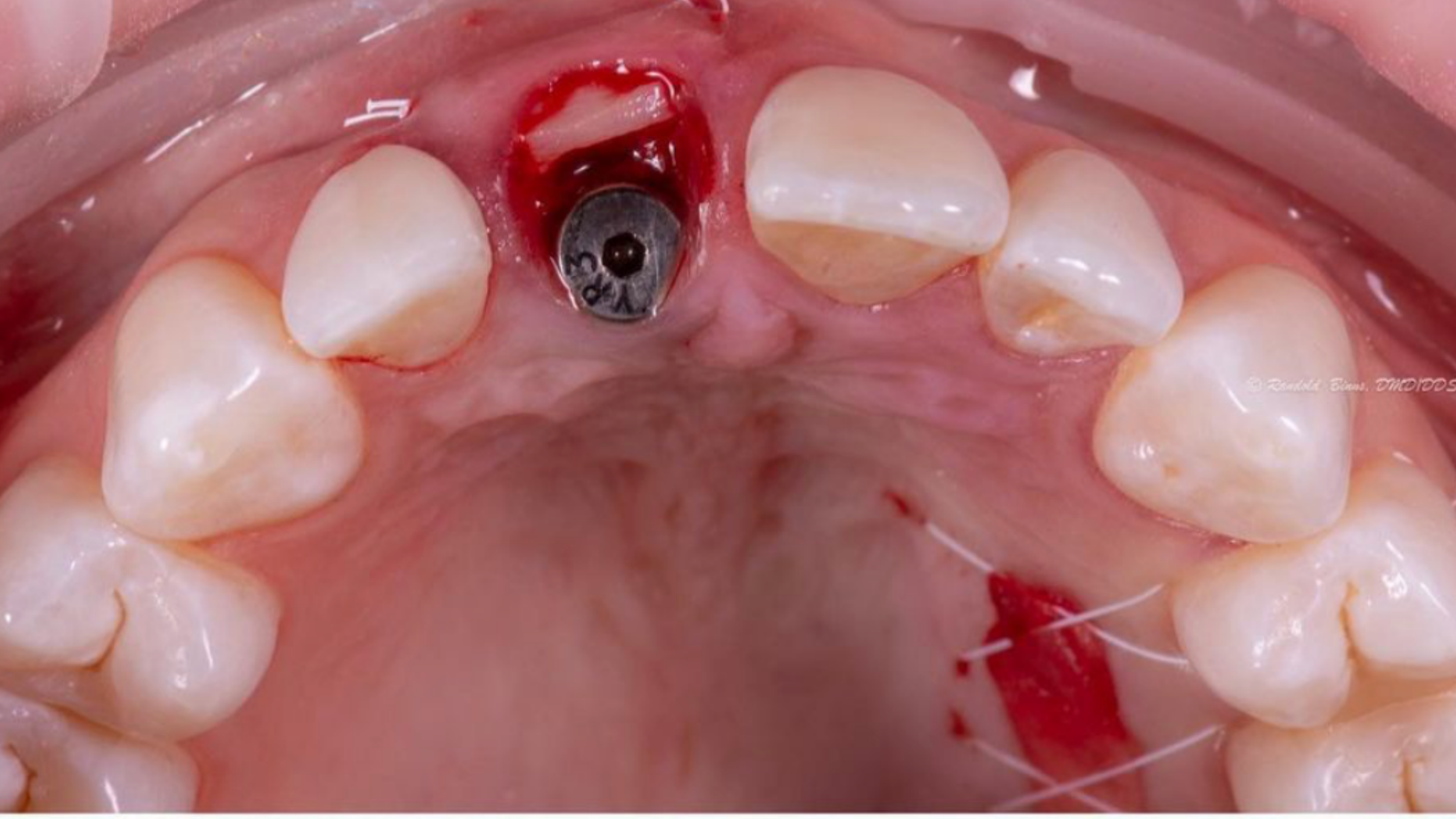



© Randall Reed, DMD/DDS











Provisionalización







